
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54275 —
2010

ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Газохроматографический метод определения
индивидуальных компонентов с использованием
высоэффективной 100-метровой
капиллярной колонки

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0 — 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2010 г. № 1108-ст

4 Настоящий стандарт идентичен стандарту ASTM D 6729 — 04 (2009) «Стандартный метод определения индивидуальных компонентов в топливах для двигателей внутреннего сгорания газовой хроматографией высокого разрешения на 100-метровой капиллярной колонке» (ASTM D 6729 — 04 (2009) «Standard test method for determination of individual components in spark ignition engine fuels by 100 metre capillary high resolution gas chromatography»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта ASTM для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 — 2004 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных стандартов ASTM соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	2
4 Сущность метода	2
5 Значение и применение	3
6 Аппаратура	3
7 Реактивы и материалы	4
8 Предварительная проверка оборудования	11
9 Проведение испытания	13
10 Обработка результатов	13
11 Обработка результатов для оксигенатов	14
12 Оформление результатов	15
13 Прецизионность и систематическая ошибка метода	15
Приложения А (обязательные)	16
А1 Данные по углеводородам	16
А2 Исследование линейности отклика оксигенатов	37
Приложения Х (справочные)	51
Х1 Список используемой литературы	51
Х2 Данные для углеводородов при использовании водорода в качестве газа-носителя	52
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных стандартов АСТМ ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)	71

ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Газохроматографический метод определения индивидуальных компонентов с использованием высокоэффективной 100-метровой капиллярной колонки

Automotive fuels. Method for determination of individual components by 100 metre capillary high resolution column gas chromatography

Дата введения — 2012 — 07 — 01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на топлива для двигателей внутреннего сгорания и их смеси с оксигенатами (метил-*трет*-бутиловым эфиром (МТБЭ), этил-*трет*-бутиловым эфиром (ЭТБЭ), этанолом и т. д.) с температурами конца кипения до 225 °С и устанавливает метод определения в них индивидуальных углеводородных компонентов.

Настоящий метод может быть использован для других легких жидких углеводородов, таких как компоненты для смешения (нафты, реформаты, алкилаты и т. д.), обычно получаемых в процессах переработки нефти, однако статистические данные получены только для смесевых топлив для двигателей внутреннего сгорания.

1.2 Исходя из результатов совместных испытаний прецизионность определения концентрации индивидуальных компонентов настоящим методом установлена в диапазоне от 0,01 % масс. до приблизительно 30 % масс.

Настоящий метод может быть применен для более высоких или низких концентраций индивидуальных компонентов, однако пользователь должен проверить прецизионность, если метод используется для компонентов вне установленных пределов концентраций.

1.3 Настоящим методом также определяют метанол, этанол, *трет*-бутанол, МТБЭ, ЭТБЭ, *трет*-амил-метилловый эфир (ТАМЭ) в топливах для двигателей внутреннего сгорания в концентрациях от 1 % масс. до 30 % масс. Однако данные межлабораторного эксперимента обеспечивают достаточные статистические данные только для МТБЭ.

1.4 Хотя большинство присутствующих углеводородов определено индивидуально, встречаются совместно элюирующиеся компоненты. Если настоящий метод используют для оценки общего группового углеводородного состава (PONA), то при использовании этих результатов следует учитывать ошибки, возникающие из-за совместного элюирования и отсутствия идентификации всех присутствующих компонентов. Использование образцов, содержащих значительные количества олефинов или нафтенов (например, виргинская нефть) или и тех, и других, выходящих после *n*-октана, может привести к существенным ошибкам при определении группового углеводородного состава — PONA. По результатам межлабораторного исследования образцов бензина данная процедура применима к образцам, содержащим менее 25 % масс. олефинов. Тем не менее возможно некоторое наложение пиков из-за совместного элюирования с олефинами выше C₇, особенно если анализируются компоненты для смешения или их высококипящие остатки, такие как продукты каталитического крекинга в кипящем слое (FCC), при этом общее содержание олефинов может быть неточным.

1.4.1 При необходимости общее содержание олефинов может быть определено или подтверждено методом АСТМ Д 1319 (в % об.) или другими методами, например основанными на многомерном PONA анализе.

1.5 Содержание воды или ожидаемое ее присутствие при необходимости может быть определено с использованием метода АСТМ Д 1744 или эквивалентного ему. Другие соединения, содержащие кисло-

род, серу, азот и т. п., также могут присутствовать и могут элюироваться совместно с углеводородами. Если требуется определить эти индивидуальные компоненты, то рекомендуется использовать специфические методы, такие как методы ASTM Д 4815 и ASTM Д 5599 для оксигенатов и метод ASTM Д 5623 для сернистых соединений или эквивалентные.

1.6 В приложении А1 сравниваются результаты межлабораторных испытаний настоящего метода и других методов испытаний для некоторых образцов по отдельным компонентам, включая олефины, и отдельным группам углеводородов. Чтобы исключить ошибки при анализе бензола, толуола и отдельных оксигенатов, необходимо определять их с использованием специальных методов.

1.7 Значения, выраженные в единицах СИ, являются стандартными. Значения, приведенные в скобках, даны только для сведения.

1.8 Разработка мер по обеспечению техники безопасности не является целью настоящего стандарта. Пользователи настоящего стандарта несут ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяют целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ASTM Д 1319 Метод определения типов углеводородов в жидких нефтепродуктах адсорбцией флюоресцентных индикаторов (ASTM D 1319, Standard test method for hydrocarbon types in liquid petroleum products by fluorescent indicator adsorption)

ASTM Д 1744 Метод определения воды в жидких нефтепродуктах реактивом Карла Фишера (ASTM D 1744, Test method for water in liquid petroleum products by Karl Fischer reagent)¹⁾

ASTM Д 4815 Метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, трет-амилового спирта и спиртов C₁ по C₄ в бензинах газовой хроматографией (ASTM D 4815, Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-amyl alcohol and C₁ to C₄ alcohols in gasoline by gas chromatography)

ASTM Д 5599 Метод определения оксигенатов в бензине газовой хроматографией с кислородно-селективным пламенно-ионизационным детектором (ASTM D 5599, Standard test method for determination of oxygenates in gasoline by gas chromatography and oxygen selective flame ionization detection)

ASTM Д 5623 Метод определения сернистых соединений в светлых жидких нефтепродуктах газовой хроматографией с сероселективным детектором (ASTM D 5623, Standard test method for sulfur compounds in light petroleum liquids by gas chromatography and sulfur selective detection)

ASTM Е 355 Практическое руководство по терминологии газовой хроматографии. Термины и определения (ASTM E 355, Standard practice for gas chromatography. Terms and relationships)

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены общие для газовой хроматографии процедуры, термины и определения по ASTM Е 355.

4 Сущность метода

4.1 Представительные образцы жидкого нефтепродукта вводят в газовый хроматограф, оснащенный капиллярной колонкой с нанесенной на ее стенки подходящей неподвижной фазой. Газ-носитель — гелий, транспортирует испарившийся образец через колонку, в которой он разделяется на индивидуальные компоненты, попадающие по мере элюирования при выходе из колонки на пламенно-ионизационный детектор. Сигнал детектора записывается в цифровой форме при помощи интегратора или интегрирующего компьютера. Каждый элюируемый компонент идентифицируется сравнением его времени удерживания с временем удерживания, полученным при анализе стандартных образцов в идентичных условиях. Концентрация каждого компонента в процентах по массе определяется внутренней нормализацией площадей пиков после внесения поправки на фактор отклика детектора по площадям пиков отдельных компонентов. Неизвестные компоненты фиксируются как индивидуально, так и в сумме.

¹⁾ Отменен. Последняя версия этого стандарта приведена на сайте www.astm.org.

5 Значение и применение

5.1 Знание индивидуального компонентного состава бензиновых топлив и компонентов смешения используется в спецификации продукта для контроля качества топлива и процессов переработки нефти. Данный метод позволяет проводить контроль процессов и соответствия продукта спецификации по многим индивидуальным углеводородам.

6 Аппаратура

6.1 Газовый хроматограф, оснащенный термостатом с охлаждением для колонки, способным поддерживать воспроизводимые температурные условия испытания в диапазоне от 0 °С до 300 °С. Для проведения анализа рекомендуется использовать следующие электронные устройства: контроля потока, контроля деления введенного образца и контроля давления. Хотя использование этих устройств является необязательным, изучение метода показывает преимущества газового хроматографа, имеющего такое оборудование. Данные устройства заменяют обычные ручные расчеты, необходимые согласно 8.1 и 8.2.

6.2 Инжектор ввода в капиллярную колонку с делением/без деления потока. Рекомендуется инжектор с делением потока, работающий в своем линейном диапазоне (см. 8.4 для определения правильного коэффициента деления).

6.2.1 Работа пневматической системы хроматографа

Участники межлабораторных сравнительных испытаний использовали режим работы газового хроматографа при постоянном давлении. Можно использовать другие режимы контроля газа-носителя, например режим постоянного потока (программирование давления); если не учитывать программирование профиля температуры для компенсации разности параметров потока, то это может привести к изменению характера элюирования.

6.2.2 Контроль пневматики хроматографа

Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ) проводились при постоянном давлении. Для контроля газа-носителя, например постоянства потока (программируемого давления), можно использовать другие способы, но это может вызвать изменение характеристик элюирования, пока программирование профиля температуры не будет подстроено для компенсации различий в потоках газа.

6.2.3 Температурный контроль

Инжектор, работающий в режиме деления потока, должен нагреваться с использованием отдельного нагревателя до температуры от 200 °С до 275 °С.

6.3 Капиллярная колонка из плавленого кварца длиной 100 м, внутренним диаметром 0,25 мм, покрытая привитой пленкой диметилполисилоксана толщиной 0,5 мкм. Колонка должна отвечать требованиям по разрешению, представленным в 8.3. В МСИ использовались колонки двух различных производителей.

6.4 Система обработки хроматографических данных с использованием компьютера, способная точно и достоверно измерять время удерживания и площади элюируемых пиков. Система должна собирать данные с частотой не менее чем 10 герц.

Рекомендуется система обработки данных, которая определяет разрешение колонки R , так как это исключает необходимость расчетов вручную в соответствии с 8.3.

6.4.1 Электронный интегратор, способный сохранять до 400 компонентов в таблице пиков, частотой сбора данных 10 герц или более, интегрирующий пики, имеющие ширину на половине высоты, равную 1,0 с. Интегратор должен отображать режим интегрирования для частично разделенных пиков. Данный интегратор должен поддерживать общедоступный формат передачи данных (например, ASCII) на компьютере с целью упрощения обработки данных.

6.5 Введение образца следует проводить с использованием клапана, автоматического дозирующего устройства, автоматизированного инжектора или другим автоматизированным способом. Автоматическое устройство ввода образца существенно влияет на воспроизводимость анализа. Ручной ввод не рекомендуется. Все данные по прецизионности, приведенные в данном методе для образцов, были получены с использованием автоматических инжекторов.

6.6 Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) чувствительностью 0,005 Кл/г по *n*-бутану. Линейный динамический диапазон детектора должен составлять 10^6 или более. Детектор нагревают до 300 °С.

7 Реактивы и материалы

7.1 Стандартная калибровочная смесь. Необходимо использовать стандартный образец топлива для двигателей внутреннего сгорания известного состава и концентрации (% масс.). В целях подтверждения идентификации образца на рисунке 1 приведена типичная хроматограмма для стандартного образца бензина ARC 960X¹⁾.

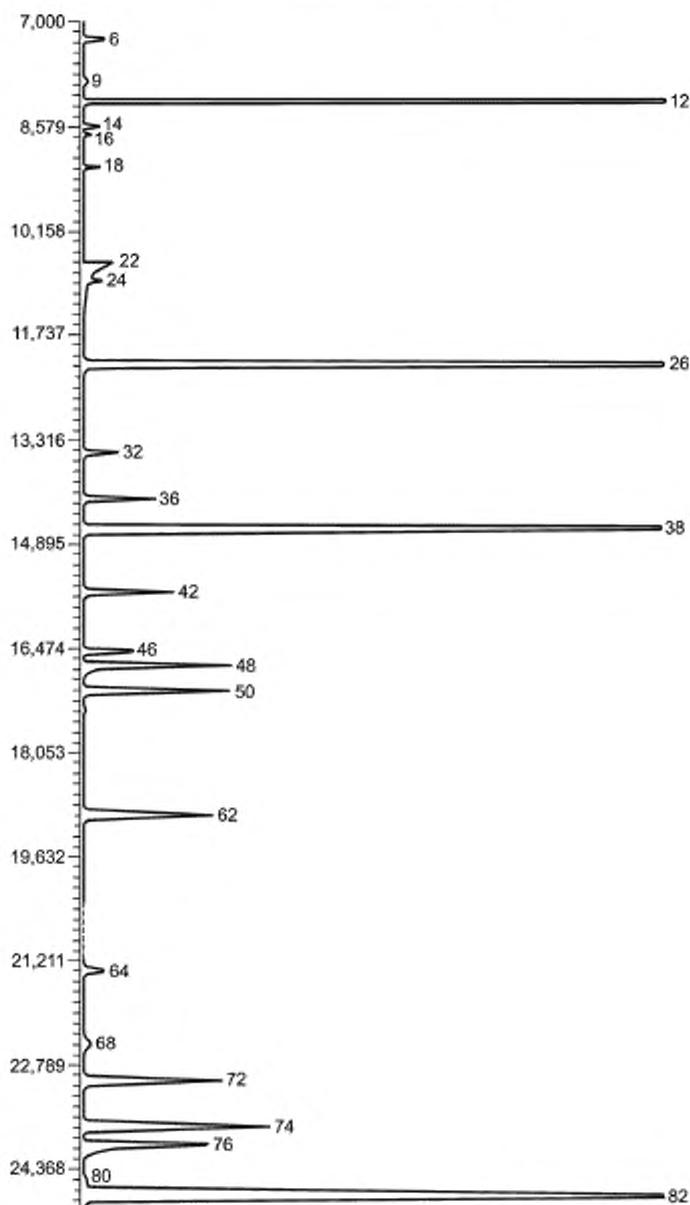


Рисунок 1 — Хроматограмма стандартного образца бензина²⁾

¹⁾ Наименования и номера пиков индивидуальных углеводородных компонентов, предусмотренные хроматограммами, одинаковые для всех рисунков и таблиц.

²⁾ Номера пиков — см. таблицу А.1.1 приложения А1.

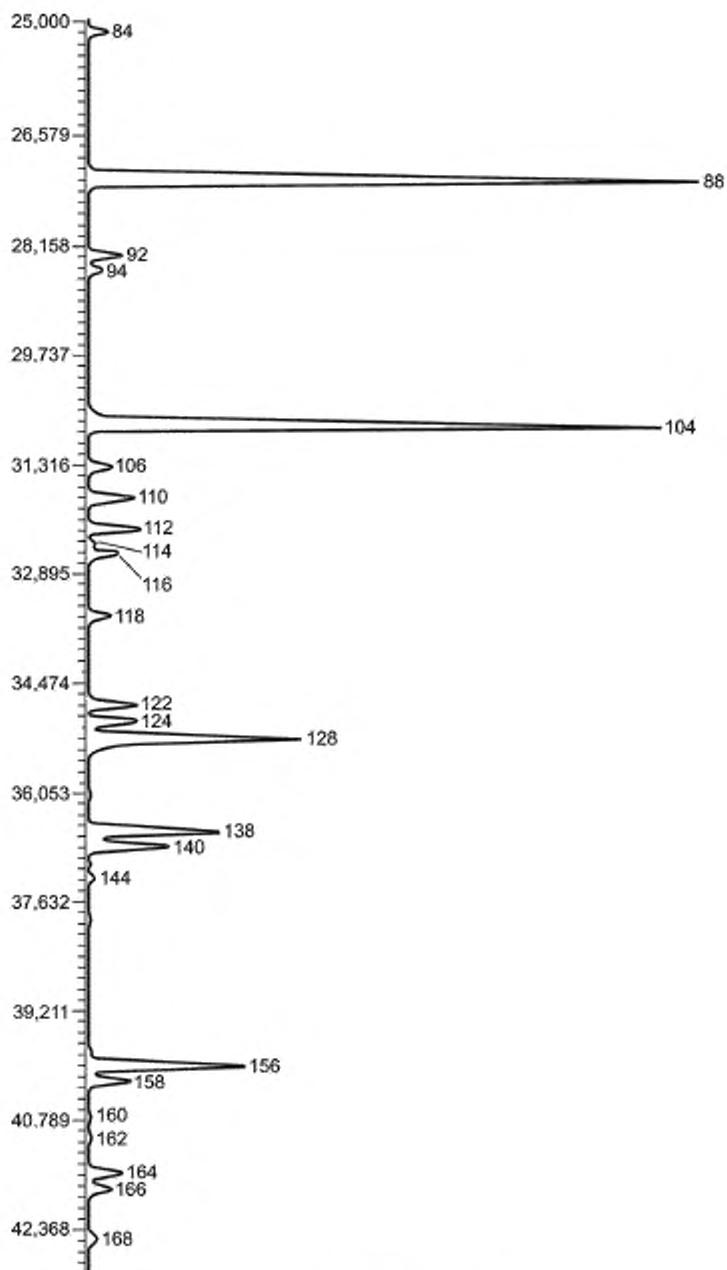


Рисунок 1, лист 2

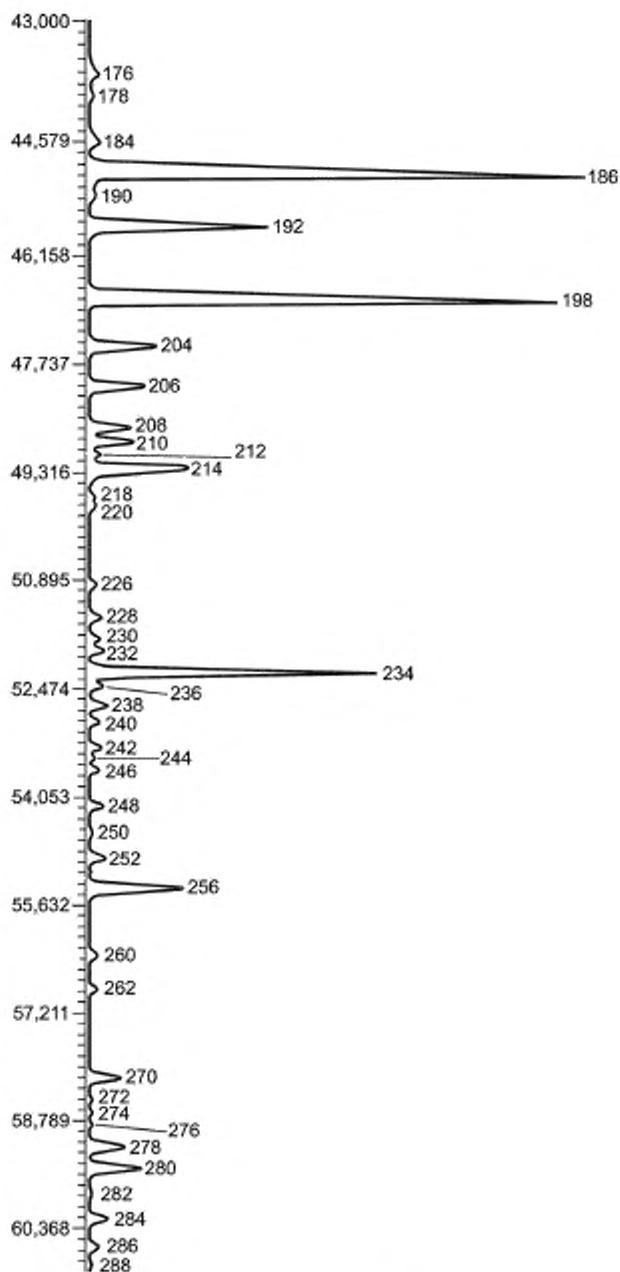


Рисунок 1, лист 3

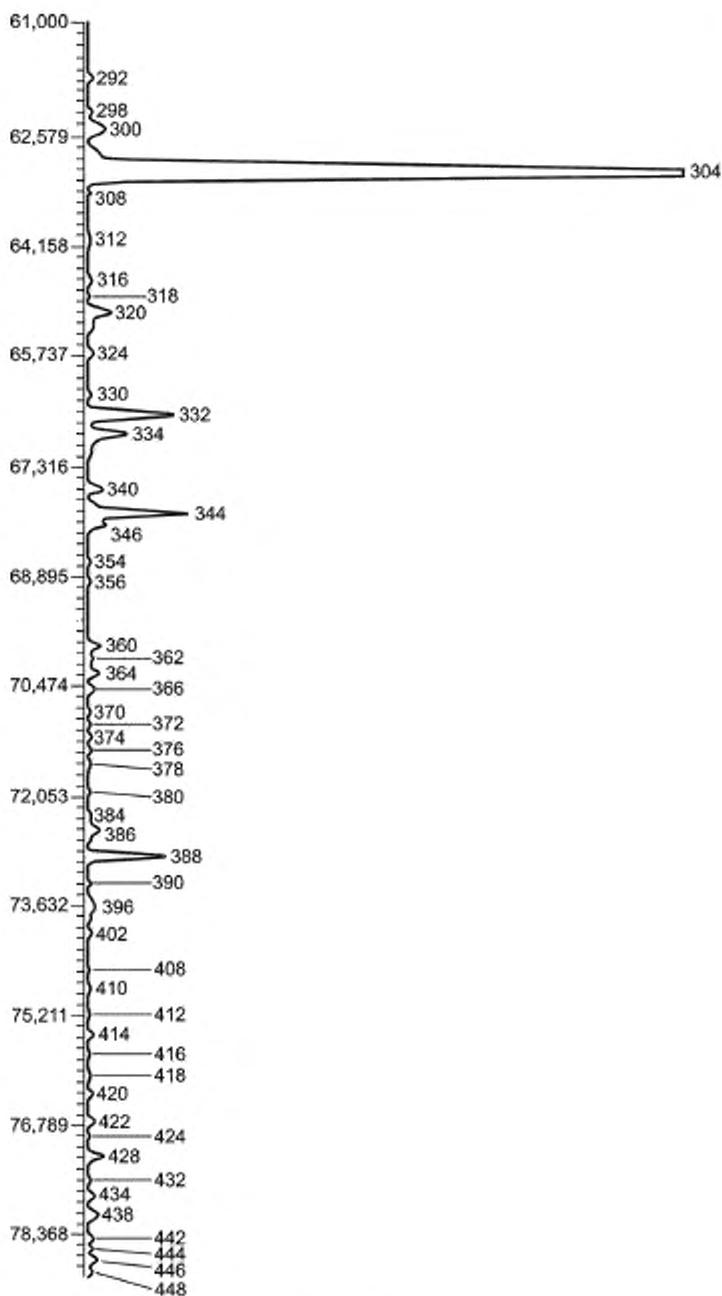


Рисунок 1, лист 4

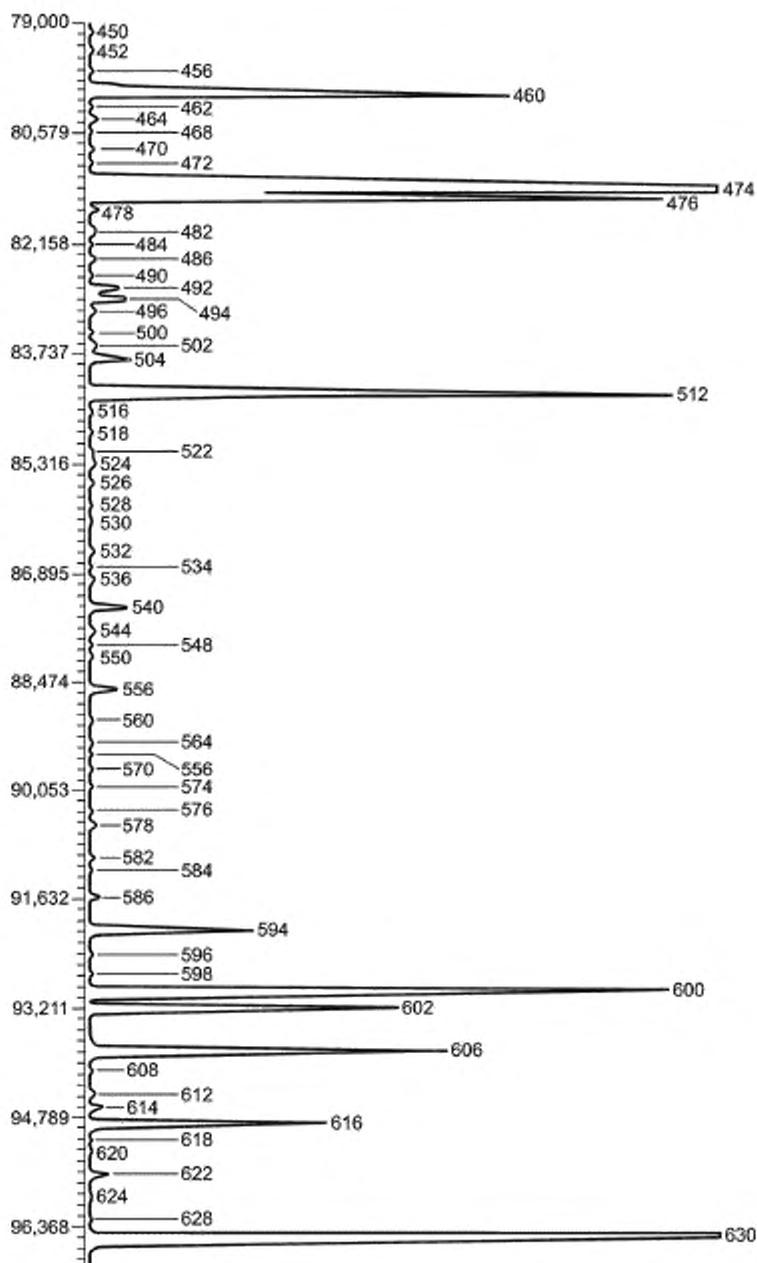


Рисунок 1, лист 5

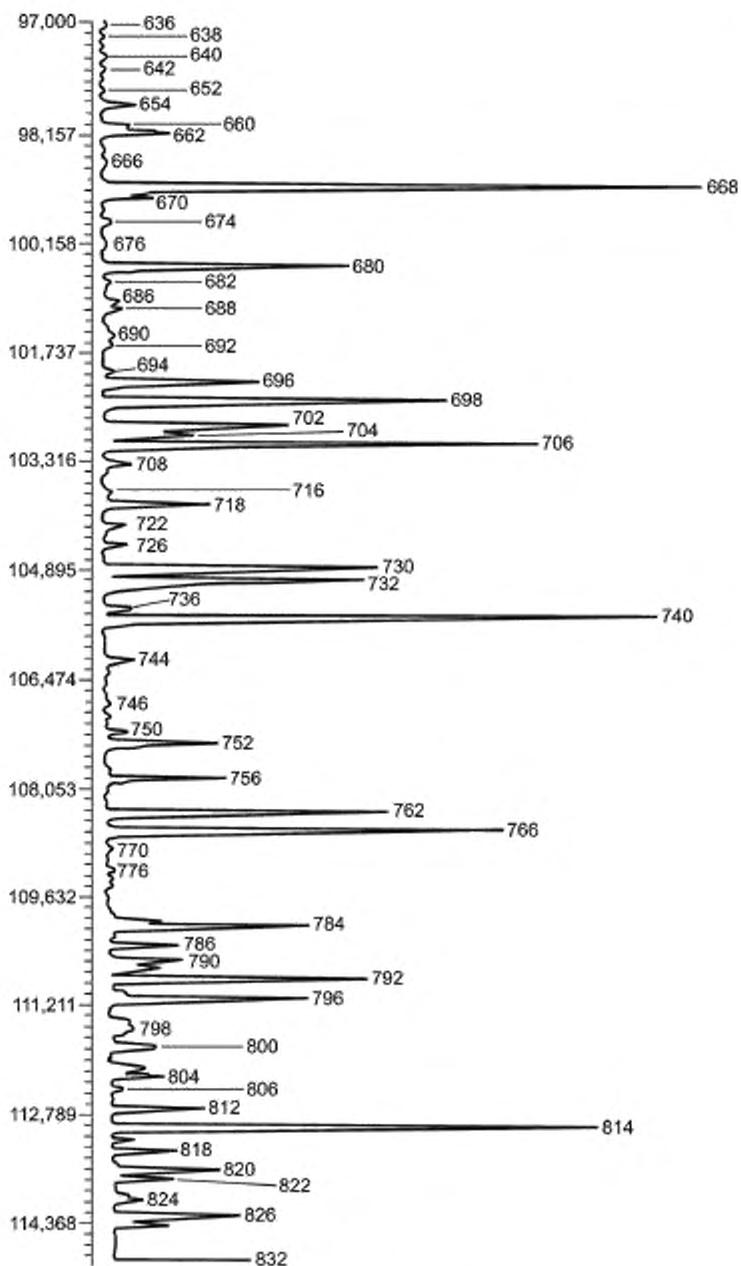


Рисунок 1. лист 6

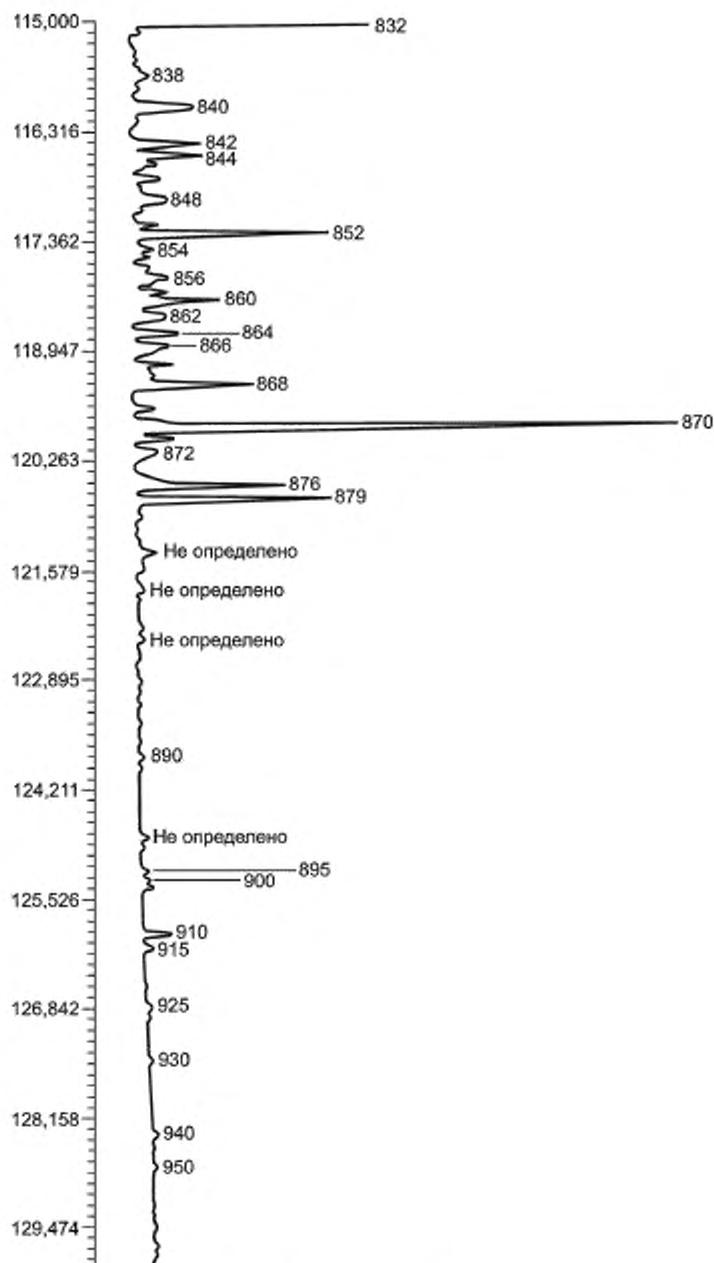


Рисунок 1, лист 7

7.2 Газы для газовой хроматографии. Все применяемые газы должны иметь чистоту 99,999 % об. или выше.

Примечание 1 — **Предупреждение** — Используют сжатые газы. Некоторые из них пожароопасны, и все находятся под высоким давлением.

7.2.1 Гелий. Представленные результаты получены с газом-носителем гелием. Возможно использование другого газа-носителя для выполнения данной процедуры. На данный момент нет данных по прецизионности метода для других носителей.

7.2.2 Воздух, водород и вспомогательный газ (гелий или азот) чистотой 99,999 % об. или выше.

8 Предварительная проверка оборудования

8.1 Установки

8.1.1 Линейная скорость газа. Если хроматограф имеет электронный контроль за расходом газа, устанавливают скорость потока, равную 1,8 см³/мин. Этого достигают установкой скорости газа-носителя при введении пробы метана или природного газа при 35 °С. Убеждаются, что время удерживания метана составляет (7,00 ± 0,05) мин. Оно соответствует линейной скорости 25 — 26 см/с. Это эквивалентно времени удерживания метана при 0 °С, равному от 6,5 до 6,8 мин.

8.1.2 Если хроматограф не имеет устройства электронного расхода газа, рассчитывают линейную скорость газа V , см/с, по следующей формуле

$$V = \frac{\text{длина колонки, см}}{\text{время удерживания метана, с}} \quad (1)$$

8.1.3 Типичное время удерживания метана составляет 6,5 — 6,8 мин, а линейная скорость для газа гелия — от 24 до 26 см/с.

8.2 Установка деления потока

8.2.1 Если хроматограф оборудован электронным устройством контроля деления потока, устанавливают отношение деления образца 200:1. Если хроматограф не оборудован таким устройством, сначала вычисляют скорость потока в колонке F и потом рассчитывают отношение деления S по формулам:

$$F = \frac{(60\pi r^2)L(T_{ref})^2(P_1 - P_0)}{(T)3(P_{ref})(P_1^2 - P_0^2)} \mu, \quad (2)$$

где r — радиус колонки, см;

L — длина колонки, см;

T_{ref} — температура на выходе колонки, °С;

P_1 — давление на входе;

P_0 — давление на выходе;

T — температура термостата колонки, °С;

P_{ref} — относительное давление, равное 1 атм;

μ — линейная скорость, см/с;

$$S = \frac{\text{поток через вентиль делителя} + F}{F} \quad (3)$$

8.2.2 Скорость потока через колонку вычисляют по формуле (2). Используя результаты, полученные по формуле (3), настраивают поток делителя, пока не получают деление потока, приблизительно равное 200:1.

8.3 Оценка эффективности колонки

8.3.1 Перед использованием колонки по условиям, указанным в таблице 1, определяют ее разрешение в условиях, указанных в таблице 2. Проверяют, чтобы разрешение колонки для приведенных пар компонентов, рассчитанное по формуле (4), соответствовало установленным требованиям (таблица 2).

Т а б л и ц а 1 — Условия хроматографирования, требования к колонке и системе обработки данных

Условия хроматографирования	Требование	Условия хроматографирования	Требование
Установки инжектора: температура инжектора, °С	250	Установки детектора: температура детектора, °С ^А	300 — 350
соотношение деления потоков вкладыш	175:1 — 275:1 Деактивированное стекло	Расход газов: водород, см ³ /мин ^В	30 — 40
вводимый объем, мкл	0,2 — 0,5	воздух, см ³ /мин	300 — 500
		вспомогательный азот, см ³ /мин	30

Окончание таблицы 1

Условия хроматографирования	Требование	Условия хроматографирования	Требование
Установки термостата колонки: начальная температура, °С	0	Требования к колонке: длина, м	100
начальное время, мин	15	внутренний диаметр, мм	0,25
скорость первой стадии, °С/мин	1	жидкая фаза	100%-ный диметилполи- силоксан
конечная температура, °С	50	толщина неподвижной фазы, мкм	0,5
время выдержки, мин	0	давление, фунт/дюйм ²	40 — 50
скорость второй стадии, °С/мин	2	поток, см ³ /мин	1,7 — 2,0
конечная температура, °С	130	линейная скорость газа, см/с	24,5
время выдержки, мин	0	Частота обработки, Гц	10 — 20
скорость третьей стадии, °С/мин	4	Полное время анализа, мин	140 — 150
конечная температура, °С	270		
время выдержки, мин ^{С1}	0		
<p>А) Устанавливается на 20 °С — 25 °С выше наибольшей температуры колонки. В) Устанавливается по рекомендациям производителя. С) Конечная температура или время задержки может быть подстроено для достижения полного элюирования компонентов образца.</p>			

Т а б л и ц а 2 — Требования к разрешению колонки

Пара компонентов	Минимальное разрешение	Концентрация каждого из компонентов, %
Бензол и 1-метилциклопентен	1,0	0,5 — 0,5
Метаксилол и параксилол	0,4	2,0 — 2,0
н-Тридекан и 1-метилнафталин	1,0	0,5 — 0,5

$$R = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{1,699(W_{R1} + W_{R2})}, \quad (4)$$

где t_{R2} — время удерживания второго компонента пары;

t_{R1} — время удерживания первого компонента пары;

W_{R1} — ширина первого пика на его полувысоте;

W_{R2} — ширина второго пика на его полувысоте.

8.3.1.1 Разрешение колонки должно периодически проверяться по разделению указанных соединений.

8.3.2 Оценка базовой линии. Выполняют процедуру хроматографирования без ввода растворителя, задавая установки хроматографа в соответствии с таблицей 1.

8.3.3 Вычитают базовую линию из хроматограммы образца и проверяют, чтобы исправленный сигнал в начале хроматограммы не отличался от сигнала в конце хроматограммы более чем на 2 %.

8.4 Оценка линейности делителя

8.4.1 Используя стандартный образец бензина, проводят его испытания согласно режиму, приведенному в таблице 3.

8.4.2 Выбирают из хроматограммы от 10 до 15 компонентов, которые имеют концентрацию в области от 0,01 % масс. до 30 % масс. Составляют таблицу зависимости концентрации этих 10 — 15 компонентов от величины соотношения деления потоков. Проверяют, чтобы для этих выбранных компонентов концентрации не отличались более чем на 3 % масс. (относительных).

Т а б л и ц а 3 — Режим испытания стандартного образца

Деление потока	Вводимый объем μ , л	Температура инжектора, °С
100:1	0,1	250
200:1	0,5	250
300:1	1,0	250

9 Проведение испытания

9.1 Устанавливают рабочие параметры хроматографа в соответствии с требованиями таблицы 1. При этих заданных условиях будут элюироваться все компоненты до пентадекана ($n-C_{15}$) включительно.

9.2 Все параметры таблицы 1 могут быть незначительно изменены для оптимизации в зависимости от типа образца и характеристик самой хроматографической системы. При этом температура конца кипения образцов не должна превышать температуру для $n-C_{15}$, и требования по разрешению колонки R , приведенные в таблице 2, должны выполняться.

9.3 Представительную пробу отбирают в соответствии с ASTM Д 4057¹⁾ или требованиями национальных стандартов. Для летучих образцов потери легких компонентов сводят к минимуму. Контейнер для образца должен быть предварительно охлажден перед внесением в него пробы. Охлаждают пробу до температуры ниже 4 °С, хранят при этой температуре до момента введения образца в автоматическое дозирующее устройство и начала анализа.

9.4 Подготовка и хранение

9.4.1 Хранение образцов в ампулах

Перед отбором аликвотной части или перед заполнением ампул охлаждают исходный образец до температуры ниже 4 °С. Емкость для аликвоты или ампула, или та, и другая перед переносом исходного образца также должны быть охлаждены. Шприцы также должны охлаждаться перед введением пробы.

9.4.2 Хранение образцов в контейнерах под давлением

Рекомендуется, чтобы контейнеры при хранении не подвергались прямому воздействию тепла и света. Для образцов, хранящихся в контейнерах под давлением, не требуется дополнительной подготовки пробы. Температура хранения должна быть не выше 25 °С. Хранят образцы в соответствии с инструкциями производителя.

9.5 Проверка проведения процедуры осуществляется периодически путем анализа стандартного образца (QA), подобного по составу исследуемым бензинам (рисунок 1). Проверку рекомендуется проводить раз в неделю или после каждого 15 образцов. Для оценки результатов контроля качества данного метода можно отслеживать время удерживания бензола и составлять таблицы статистических данных. Другие интересные компоненты стандартного образца можно прослеживать подобным образом. В результате наблюдения за этими компонентами в течение длительного периода времени можно определить эффективность работы колонки и хроматографической системы в целом.

10 Обработка результатов

10.1 Идентификация компонентов

Составляют таблицу, включающую все компоненты образца с их временем удерживания. Сравнивают время удерживания каждого пика с временем удерживания стандартного образца бензина. Обращают особое внимание на то, что колонка может быть перегружена, и пики будут иметь сдвиги по времени удерживания. Рассматривают характеристики пиков и уточняют, используя таблицу 4, правильность их идентификации сравнением со стандартным образцом.

Т а б л и ц а 4 — Преобладающие компоненты и идентифицированные соединения, элюирующиеся совместно^{А)}

Номер пика (приложение А1)	Преобладающий компонент	Совместно элюирующий компонент
164	3,3-Диметилпентан	5-Метил-1-гексен
186	2-Метилгексан	C ₇ -олефин
278	2,5-Диметилгексан	C ₈ -олефин
286	3,3-Диметилгексан	C ₈ -олефин
304	Толуол	2,3,3-Триметилпентан ^{В)}
324	1,1,2-Триметилциклопентан	C ₇ -триолефин
326	C ₈ -диолефин	C ₈ -парафин

^{А)} Это незаконченный список. Из-за возможности совместного элюирования в других областях пользователь должен обращать внимание на расшифровку данных.

^{В)} В большинстве алкилатных бензинов может наблюдаться наложение толуола и 2,3,3-триметилпентана.

П р и м е ч а н и е — Коэффициент отклика для преобладающего компонента использован для расчета всего пика.

¹⁾ ASTM Д 4057 Руководство по ручному отбору проб нефти и нефтепродуктов (ASTM D 4057, Standard practice for manual sampling of petroleum and petroleum products).

10.2 Постоянство идентификации пиков может быть достигнуто использованием программного обеспечения (программы сбора данных, таблиц базы данных и т. д.). Альтернативно может быть использована система индексов удерживания, рассчитываемых по формуле

$$(R1)_i = 100n + 100 \left[\frac{\log(T_i) - \log(T_n)}{\log(TN) - \log(T_n)} \right], \quad (5)$$

где $(R1)_i$ — индекс удерживания i -го компонента, ограниченного n -парафинами,

n — нижняя граница;

N — верхняя граница;

T_i — исправленное время удерживания i -го компонента (время удерживания i -го компонента минус время удерживания метана);

T_n — исправленное время удерживания n -го n -парафина;

TN — исправленное время удерживания N -го n -парафина.

10.3 Вычисляют коэффициенты отклика углеводородов по формуле

$$RRF_{CH_4} = \frac{MW_i}{N_c} \cdot \frac{1}{MW_{CH_4}}, \quad (6)$$

где RRF_{CH_4} — относительный коэффициент отклика каждого компонента в сравнении с метаном ($RRF_{CH_4} = 1,000$);

MW_i — молекулярная масса i -го компонента;

N_c — число углеродных атомов в молекуле;

MW_{CH_4} — молекулярная масса метана, равная 16,04276.

10.4 Корректируют полученные площади, умножая каждую площадь на соответствующий относительный коэффициент отклика по формуле

$$(A_c)_i = (A)_i (RRF)_i, \quad (7)$$

где $(A_c)_i$ — скорректированная площадь;

A_i — зарегистрированная площадь для i -го компонента;

RRF_i — относительный коэффициент отклика (массовый базис).

10.4.1 Массовый процент рассчитывают по формуле

$$W_i = \frac{(A_c)_i}{\sum_{i=1}^{i=n} (A_c)_i} 100, \quad (8)$$

где W_i — массовая доля i -го компонента в смеси, % масс.;

$\sum_{i=1}^{i=n} (A_c)_i$ — сумма скорректированных площадей для всех компонентов.

10.4.1.1 Индекс i указывает на то, что операция проводится для каждого компонента смеси.

10.5 В случае неидентифицированных компонентов используют относительный коэффициент отклика, равный 0,800 (относительно метана).

11 Обработка результатов для оксигенатов

11.1 Сравнительное исследование линейности было выполнено для метанола, этанола, *трет*-бутанола, МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ в диапазоне концентраций от 1,0 % масс. до 30 % масс. (приложение А2). Сред-

ние относительные коэффициенты отклика для оксигенатов вычислены на основании этих данных и приведены в таблицах А2.1 и 5. Они включены в метод определения индивидуальных углеводородов — метод IHA. Стандартное отклонение значений относительных откликов составляет более 7 %. МТБЭ является единственным оксигенатом, который присутствовал в значительном числе образцов, достаточном для требований стандарта по круговым испытаниям. Поэтому для расчетов статистические данные для МТБЭ могут быть взяты из таблицы А1.2.

Т а б л и ц а 5 — Коэффициенты отклика для кислородсодержащих соединений

Анализируемый компонент	Относительный коэффициент отклика	
	$RRF_{C_7} = 1,000$	$RRF_{C_{H_4}} = 1,000$
Метанол	2,996	2,672
Этанол	2,087	1,862
<i>трет</i> -Бутанол	1,302	1,161
Метил- <i>трет</i> -бутиловый эфир (МТБЭ)	1,577	1,407
Этил- <i>трет</i> -бутиловый эфир (ЭТБЭ)	1,407	1,255
<i>трет</i> -Амил-метиловый эфир (ТАМЭ)	1,356	1,210

12 Оформление результатов

12.1 Записывают концентрацию каждого из компонентов в массовых процентах с точностью 0,001 %.

12.2 Полученные концентрации индивидуальных компонентов могут быть суммированы по группам компонентов, таких как парафины, изопарафины, олефины, ароматические углеводороды, нафтены, оксигенаты и неидентифицированные компоненты. Для этого могут быть использованы разработанные компьютерные программы, которые позволяют также рассчитывать другие свойства нефтяных жидкостей.

13 Прецизионность и систематическая ошибка метода

13.1 Оценки повторяемости и воспроизводимости приведены в таблице А1.2.

13.2 Основные принципы установления прецизионности (анализ пригодности процесса)

13.2.1 Каждый анализируемый компонент, для которого определяются показатели прецизионности, должен присутствовать не менее чем в шести образцах и определяться не менее чем в шести лабораториях хотя бы однократно.

13.2.2 Отношение стандартного отклонения повторяемости к среднему значению для каждого компонента/образца должно быть менее или равно 0,1.

13.3 Краткие пояснения к таблицам приложения А1

13.3.1 ID — идентификация;

13.3.2 r_{min} — нижняя 95%-ная граница достоверности r_{est} ;

13.3.3 r_{est} — оценка повторяемости в процентах концентрации;

13.3.4 r_{max} — верхняя 95%-ная граница достоверности r_{est} ;

13.3.5 R_{min} , R_{max} , R_{est} — те же показатели для воспроизводимости;

13.3.6 C_{min} — минимальная концентрация для которой применимы r_{est} и R_{est} .

13.3.7 C_{max} — максимальная концентрация, для которой применимы r_{est} и R_{est} .

13.4 Суммарные значения прецизионности для парафинов, изопарафинов, C_2 -бензолов и оксигенатов, определенные аналогичным образом, приведены в таблице А1.3.

13.5 Систематическая ошибка данного метода не может быть определена, так как отсутствует стандартный референтный образец.

Приложения А
(обязательные)

А1 Данные по углеводородам

А1.1 В таблице А1.1 представлены значения времени удерживания компонентов и их свойства.

Т а б л и ц а А1.1 — Значения времени удерживания и свойства компонентов

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекулярная масса MWt	Расчетный коэффициент отклика (см. 10.3)
1	Метан	6,74	16,04	1,000
2	Этен	7,10	28,05	0,874
3	Этан	7,21	30,07	0,937
4	Пропен	7,41	42,05	0,874
5	Пропан	7,87	44,11	0,916
6	Изобутан	8,26	58,12	0,906
7	Метанол	8,64	32,03	2,672
8	Изобутен	8,95	56,11	0,874
9	Бутен-1	8,99	56,11	0,874
10	1,3-Бутадиен	9,17	54,09	0,843
12	<i>n</i> -Бутан	9,28	58,12	0,906
14	<i>транс</i> -Бутен-2	9,70	56,11	0,874
16	2,2-Диметилпропан	9,82	72,15	0,899
17	<i>цис</i> -Бутен-2	10,33	56,11	0,874
20	1,2-Бутадиен	10,88	54,09	0,843
22	Этанол	11,39	46,07	1,862
24	3-Метилбутен-1	12,21	70,13	0,874
26	Изопентан	13,57	72,15	0,899
28	1,4-Пентадиен	14,25	68,12	0,849
30	Бутин-2	14,57	54,09	0,843
32	Пентен-1	15,03	70,13	0,874
34	Изопропанол	15,28	60,11	1,950
36	2-Метилбутен-1	15,76	70,13	0,874
38	<i>n</i> -Пентан	16,24	72,15	0,899
40	2-Метилбутадиен-1,3	16,73	68,12	0,849
42	<i>транс</i> -Пентен-2	17,23	70,13	0,874
44	3,3-Диметилбутен-1	17,86	84,16	0,874
46	<i>цис</i> -Пентен-2	18,17	70,13	0,874
48	<i>трет</i> -Бутанол (ТБА)	18,51	74,12	1,161
50	2-Метилбутен-2	18,76	70,13	0,874
52	<i>транс</i> -1,3-Пентадиен	19,12	68,12	0,849
54	3-Метилбутадиен-1,2	19,48	68,12	0,849
56	Циклопентадиен	19,76	67,10	0,824
58	<i>цис</i> -1,3-Пентадиен	20,25	68,12	0,849
60	1,2-Пентадиен	20,51	68,12	0,849
62	2,2-Диметилбутан	20,69	86,18	0,895
64	Циклопентен	23,16	68,12	0,849
66	4-Метилпентен-1	24,30	84,16	0,874
68	3-Метилпентен-1	24,38	84,16	0,874
70	<i>n</i> -Пропанол	24,68	60,11	1,770
72	Циклопентан	24,86	70,13	0,874
74	2,3-Диметилбутан	25,57	86,15	0,895

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWt	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
76	2,3-Диметилбутен-1	25,99	84,16	0,874
78	МТБЭ	26,18	88,09	1,407
80	<i>цис</i> -4-Метилпентен-2	26,48	84,16	0,874
82	2-Метилпентан	26,66	86,18	0,895
84	<i>транс</i> -4-Метилпентен-2	72,09	84,16	0,874
86	Метилэтилкетон (МЭК)	28,00	72,06	1,570
88	3-Метилпентан	29,15	86,15	0,895
90	C ₆ -олефин	29,61	84,16	0,874
92	2-Метилпентен-1	30,29	84,16	0,874
94	Гексен-1	30,52	84,16	0,874
96	Метил-этор-бутиловый эфир (МВБЭ)	30,66	88,09	1,550
98	C ₆ -олефин	30,94	84,16	0,874
100	Бутанол-2	31,56	74,12	1,600
102	2-Этилбутен-1	32,47	84,16	0,874
104	<i>n</i> -Гексан	32,75	86,18	0,895
106	<i>цис</i> -Гексен-3	33,41	84,16	0,874
108	Диизопропилэфир (ДИПЭ)	33,58	102,00	1,600
110	<i>транс</i> -Гексен-3+гексадиен	33,86	84,16	0,874
112	2-Метилпентен-2	34,33	84,16	0,874
114	3-Метилциклопентен	34,57	82,10	0,853
116	<i>транс</i> -3-Метилпентен-2	34,71	84,16	0,874
118	<i>цис</i> -Гексен-2	35,62	84,16	0,874
120	3,3-Диметилпентен-1	36,04	98,19	0,874
122	<i>цис</i> -3-Метилпентен-2	36,92	84,16	0,874
124	ЭТБЭ	37,07	102,18	1,255
126	2,3-Диметил-1,3-бутадиен	37,19	82,10	0,853
128	Метилциклопентан	37,40	84,16	0,874
130	2,2-Диметилпентан	37,60	100,21	0,892
132	4,4-Диметилпентен-1	37,91	98,19	0,874
134	Изобутанол	38,06	74,12	1,500
136	2,3-Диметилбутен-2	38,30	84,16	0,874
138	2,4-Диметилпентан	38,99	100,21	0,892
140	1,3,5-Гексатриен	39,31	80,06	0,832
142	2,2,3-Триметилбутан	39,48	100,21	0,892
144	Метилциклопентадиен	40,17	80,06	0,832
146	C ₇ -олефин	40,30	96,19	0,874
148	C ₇ -олефин	40,68	98,19	0,874
150	C ₇ -диолефин	41,20	96,18	0,856
152	4-Метилциклопентен	41,44	82,10	0,853
154	Метиленциклопентан	42,08	82,10	0,853
156	Бензол	42,30	78,05	0,812
158	1-Метил-1-циклопентен	42,46	82,10	0,853
160	C ₇ -олефин	43,06	98,19	0,874
162	<i>цис</i> -2-Метилгексен-3	43,37	98,19	0,874
164	3,3-Диметилпентан+5-метилгексен-1	43,81	100,21	0,892
166	Циклогексан	44,07	84,16	0,874
168	<i>транс</i> -2-Метил-3-гексан	44,82	98,19	0,874
170	3,3-Диметил-1,4-пентадиен	45,44	96,18	0,856
172	<i>n</i> -Бутанол	45,58	74,12	1,500
174	Диметилциклопентадиен	45,69	94,17	0,838

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWt	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
176	<i>транс</i> -2-Этил-3-метил-бутен-1	45,97	98,19	0,874
178	4-Метилгексен-1	46,27	98,19	0,874
180	C ₇ -олефин	46,55	98,19	0,874
182	3-Метилгексен-1	46,78	98,19	0,874
184	4-Метилгексен-2	46,92	98,19	0,874
186	2-Метилгексан+C ₇ -олефин	47,29	100,21	0,892
188	2,3-Диметилпентан	47,51	100,21	0,892
190	Циклогексен	47,66	82,10	0,853
192	<i>транс</i> -Амил-метиловый эфир (ТАМЭ)	48,10	102,18	1,210
194	C ₇ -олефин	48,46	98,19	0,874
196	C ₇ -олефин	48,64	98,19	0,874
198	3-Метилгексан	49,05	100,21	0,892
200	C ₇ -олефин	49,47	98,19	0,874
202	C ₇ -олефин	49,62	98,19	0,874
204	<i>транс</i> -1,3-Диметилциклопентан	49,83	98,19	0,874
206	<i>цис</i> -1,3-Диметилциклопентан	50,40	98,19	0,874
208	<i>транс</i> -1,2-Диметилциклопентан	51,01	98,19	0,874
210	3-Этилпентан	51,21	100,10	0,892
212	C ₇ -олефин	51,43	98,19	0,874
214	2,2,4-Триметилпентан	51,61	114,23	0,890
216	C ₇ -олефин	51,75	98,19	0,874
218	1-Гептан	52,05	98,19	0,874
220	C ₇ -олефин	52,18	98,19	0,874
222	2,3-Диметил-1,3-пентадиен	52,69	96,18	0,874
224	C ₇ -диолефин	53,00	96,18	0,856
226	C ₇ -олефин	53,36	98,19	0,874
228	C ₇ -диолефин	53,81	96,18	0,856
230	C ₇ -диолефин	54,13	96,18	0,856
232	C ₇ -олефин	54,28	98,19	0,874
234	<i>n</i> -Гептан	54,59	100,21	0,892
236	<i>цис</i> -3-гептан	54,81	98,19	0,874
238	2-Метил-2-гексен	55,10	98,19	0,874
240	<i>цис</i> -Метил-3-гексен	56,35	98,19	0,874
242	<i>транс</i> -Гептен-3	55,72	98,19	0,874
244	3-Этил-2-пентен-2	55,88	96,18	0,856
246	1,5-Диметилциклопентен	56,06	96,18	0,856
248	<i>транс</i> -2-Метил-3-гексен	56,58	98,19	0,874
250	C ₇ -диолефин+C ₇ -триолефин	57,01	96,18	0,856
252	2,3-Диметил-2-пентен	57,35	98,19	0,874
254	3-Этилпентен	57,57	98,19	0,874
256	Метилциклогексан	57,79	98,19	0,874
258	C ₇ -олефин	58,28	98,19	0,874
260	1,1,3-Триметилциклопентан	56,79	112,22	0,874
262	2,2-Диметилгексан	59,29	114,10	0,890
264	2,3,4-Триметил-1,4-пентадиен	59,45	110,21	0,859
266	3,3-Диметил-1,5-гексадиен	59,79	110,21	0,859
268	C ₈ -олефин	60,12	98,19	0,874
270	Этилциклопентан	60,60	98,19	0,874
272	3-Метилциклогексан	60,99	96,18	0,856
274	Метилциклогексадиен	61,14	94,17	0,838

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWI	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
276	2,2,3-Триметилпентан	61,22	114,10	0,890
278	2,5-Диметилгексан+С ₈ -олефин	61,59	114,23	0,890
280	2,4-Диметилгексан	61,91	114,23	0,890
282	С ₇ -триолефин+С ₈ -олефин	62,28	96,18	0,856
284	<i>транс</i> , <i>цис</i> -1,2,4-Триметилциклопентан	62,68	112,22	0,874
286	3,3-Диметилгексан+С ₈ -олефин	63,13	114,23	0,890
288	С ₇ -триолефин+С ₈ -олефин	63,39	96,18	0,856
290	С ₃ -олефин	63,69	112,22	0,874
292	<i>транс</i> , <i>цис</i> -1,2,3-Триметилциклопентан	64,27	112,22	0,874
294	С ₈ -олефин	64,52	112,22	0,874
296	С ₈ -олефин	64,73	112,22	0,874
298	С ₈ -олефин	64,82	112,22	0,874
300	2,3,4-Триметилпентан	64,94	114,23	0,890
302	С ₇ -диолефин	65,25	96,18	0,856
304	Толуол	65,50	92,06	0,821
306	2,3,3-Триметилпентан	65,76	114,23	0,890
308	С ₈ -олефин	65,90	112,22	0,874
310	С ₈ -диолефин	66,12	110,21	0,859
312	С ₈ -олефин	66,48	112,22	0,874
314	С ₈ -олефин	66,65	112,22	0,874
316	С ₈ -олефин	67,08	112,22	0,874
318	С ₈ -диолефин+С ₈ -олефин	67,30	110,21	0,859
320	2,3-Диметилгексан	67,47	114,23	0,890
322	2-Метил-3-этилпентан	67,71	114,23	0,890
324	1,1,2-Триметилциклопентан+С ₇ -триолефин	68,04	112,22	0,874
326	С ₈ -диолефин+С ₈ -парафин	68,31	110,21	0,859
328	С ₈ -олефин	68,41	112,22	0,874
330	С ₈ -олефин	68,64	112,22	0,874
332	2-Метилгептан	68,86	114,23	0,890
334	4-Метилгептан	69,11	114,23	0,890
336	С ₈ -олефин+С ₇ -олефин	69,41	112,22	0,874
338	С ₈ -олефин	69,70	112,22	0,874
340	<i>цис</i> -1,3-Диметилциклогексан	69,91	112,22	0,874
342	<i>транс</i> -1,4-Диметилциклогексан	70,01	112,22	0,874
344	3-Метилгептан	70,23	114,23	0,890
346	3-Этилгексан	70,38	114,23	0,890
348	С ₈ -диолефин	70,51	110,21	0,874
350	С ₈ -олефин	70,72	112,22	0,874
352	С ₈ -олефин	70,92	112,22	0,874
354	1,1-Диметилциклогексан	71,18	112,22	0,874
356	С ₈ -олефин	71,43	112,22	0,874
358	С ₈ -олефин	71,70	112,22	0,874
360	<i>цис</i> -1-Этил-3-метилциклопентан	72,10	112,22	0,874
362	2,2,5-Триметилгексан	72,23	128,26	0,888
364	<i>транс</i> -1-Этил-3-метилциклопентан	72,46	112,22	0,874
366	<i>транс</i> -1-Этил-2-метилциклопентан	72,68	112,22	0,874
368	1-Метил-1-этилциклопентан	72,96	112,22	0,874
370	1-Октен	73,16	112,22	0,874
372	С ₈ -олефин	73,26	112,22	0,874
374	<i>транс</i> -1,2-Диметилциклогексан	73,36	112,22	0,874

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWt	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
370	C ₈ -олефин	73,48	112,22	0,874
378	C ₈ -олефин	73,68	112,22	0,874
380	<i>транс</i> -3-C ₈ -олефин	74,08	112,11	0,874
382	C ₈ -олефин	74,45	112,22	0,874
384	<i>транс</i> -1,3-Диметилциклогексан	74,66	112,22	0,874
386	<i>цис</i> -1,4-Диметилциклогексан	74,79	112,22	0,874
388	<i>n</i> -Октан	74,98	114,23	0,890
390	C ₈ -олефин	75,33	112,22	0,874
392	C ₈ -олефин	75,49	112,22	0,874
394	<i>транс</i> -2-Октен	75,62	112,22	0,874
396	Изопропилциклопентан	75,72	112,22	0,874
398	C ₉ -олефин	75,85	126,24	0,874
400	C ₉ -олефин	75,89	126,24	0,874
402	C ₉ -олефин	75,90	126,24	0,874
404	C ₉ -олефин	76,08	126,24	0,874
406	2,2,4-Триметилгексан	76,31	128,26	0,888
408	2,4,4-Триметилгексан	76,62	128,26	0,888
410	C ₉ -олефин	76,86	126,24	0,874
412	2,3,5-Триметилгексан	77,29	128,26	0,888
414	<i>цис</i> -2-Октен	77,53	112,22	0,874
416	2,2,3,4-Тетраметилпентан	77,77	128,26	0,888
418	2,2-Диметилгептан	78,02	128,26	0,888
420	<i>цис</i> -1,2-Диметилциклогексан	78,36	112,22	0,874
422	2,4-Диметилгептан	78,74	128,26	0,888
424	C ₉ -олефин	78,90	126,24	0,874
426	C ₉ -олефин	79,08	126,24	0,874
428	Этилциклогексан	79,24	112,22	0,874
430	Пропилциклопентан	79,39	112,22	0,874
432	2-Метил-4-этилгексан	79,59	128,26	0,888
434	2,6-Диметилгептан	79,74	128,26	0,874
436	C ₉ -олефин	79,85	126,24	0,874
438	1,1,4-Триметилциклогексан	80,05	126,24	0,874
440	C ₉ -олефин	80,28	126,24	0,874
442	C ₉ -олефин	80,38	126,24	0,874
444	1,1,3-Триметилциклогексан	80,52	126,24	0,874
446	2,5- и 3,5-Диметилгептан	80,69	128,26	0,888
448	C ₉ -олефин	80,88	126,24	0,874
450	3,3-Диметилгептан	81,00	128,26	0,888
452	C ₉ -парафин	81,13	128,26	0,888
454	C ₉ -олефин	81,34	126,24	0,874
456	2,3,3-Триметилгексан	81,56	128,26	0,888
458	C ₉ -олефин	81,68	126,24	0,874
460	Этилбензол	81,96	106,08	0,827
462	C ₉ -олефин	82,00	126,24	0,874
464	<i>транс</i> -1,2,4-Триметилциклогексан	82,31	126,24	0,874
466	C ₉ -олефин	82,33	126,24	0,874
468	2,3,4-Триметилгексан	82,63	128,26	0,888
470	C ₉ -олефин	82,73	126,24	0,874
472	3,3,4-Триметилгексан	82,89	128,26	0,888
474	Метаксилол	83,30	106,08	0,827

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWt	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
476	Параксиллол	83,43	106,08	0,827
478	2,3-Диметилгептан	83,57	128,26	0,888
480	3,5-Диметилгептан	83,83	128,26	0,888
482	3,4-Диметилгептан	83,91	128,26	0,888
484	C ₉ -олефин	84,08	126,24	0,874
486	3-Метил-3-этилгексан	84,26	128,26	0,888
488	C ₉ -олефин	84,41	126,24	0,874
490	4-Этилгептан	84,52	128,26	0,888
492	4-Метилоктан+C ₉ -олефин	84,70	128,26	0,888
494	2-Метилоктан	84,84	128,26	0,888
496	C ₉ -олефин	85,01	126,24	0,874
498	C ₉ -парафин	85,18	128,26	0,888
500	C ₉ -олефин	85,36	126,24	0,874
502	3-Этилгептан	85,51	128,26	0,888
504	3-Метилоктан	85,69	128,26	0,888
506	C ₉ -парафин	85,87	126,24	0,874
508	цис-1,2,4-Триметилциклогексан	85,91	126,24	0,874
510	1,1,2-Триметилциклогексан	86,05	126,24	0,874
512	орто-Ксиллол	86,27	106,08	0,827
514	C ₉ -олефин	86,47	126,24	0,874
516	C ₉ -парафин	86,57	128,26	0,888
518	C ₉ -парафин	86,75	128,26	0,888
520	C ₉ -олефин	86,90	126,24	0,874
522	транс-1-Этил-4-метилциклогексан	87,08	126,24	0,874
524	цис-1-Этил-4-метилциклогексан	87,23	126,24	0,874
526	C ₉ -парафин	87,49	128,26	0,888
528	1-Нонен	87,79	126,24	0,874
530	Изобутилциклопентан	88,00	126,24	0,874
532	C ₉ -парафин	88,45	128,26	0,888
534	транс-3-Нонен	88,65	126,24	0,874
536	цис-3-Нонен	88,82	126,24	0,874
538	C ₉ -парафин	89,09	128,26	0,888
540	n-Нонан	89,24	128,26	0,888
542	C ₁₀ -олефин	89,41	140,27	0,874
544	транс-2-Нонен	89,74	126,24	0,874
546	1-Метил-1-этилциклогексан	89,61	126,24	0,874
548	1-Метил-2-пропилциклопентан	89,96	126,24	0,874
550	C ₁₀ -олефин	90,09	140,27	0,874
552	C ₁₀ -парафин	90,18	142,28	0,887
554	C ₁₀ -парафин	90,29	142,28	0,887
556	Изопропилбензол	90,46	118,08	0,832
558	цис-Нонен-2	90,78	126,24	0,874
560	трет-Бутилциклопентан	90,80	126,24	0,874
562	C ₉ -олефин	90,88	126,24	0,874
564	Нонен	91,16	126,24	0,874
566	Изопропилциклогексан	91,32	126,24	0,874
568	3,3,5-Триметилгептан	91,44	142,28	0,887
570	2,2-Диметилоктан	91,60	142,28	0,887
572	2,4-Диметилоктан	91,67	142,28	0,887
574	1-Метил-4-изопропилциклогексан	91,82	140,27	0,874

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWt	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
576	<i>втор</i> -Бутилциклопентан	92,20	126,24	0,874
578	Пропилциклогексан	92,40	126,24	0,874
580	2,5-Диметилоктан	92,59	142,28	0,887
582	Бутилциклопентан	92,89	126,24	0,874
584	2,6-Диметилоктан	93,04	142,28	0,887
586	3,6-Диметилоктан	93,43	142,28	0,887
588	1-Метил-2-этилциклогексан	93,59	126,24	0,874
590	C ₁₀ -олефин	93,79	140,27	0,874
592	Пропилбензол	93,96	120,20	0,832
594	3,3-Диметилоктан	94,27	142,28	0,887
596	3-Метил-5-этилгептан	94,54	142,28	0,887
598	C ₁₀ -олефин	94,66	140,27	0,874
600	1-Этил-3-метилбензол	94,88	120,20	0,832
602	1-Этил-4-метилбензол	95,09	120,20	0,832
604	Нафтен	95,30	140,27	0,874
606	1,3,5-Триметилбензол	95,73	120,20	0,832
608	2,3-Диметилоктан	95,94	142,28	0,887
610	5-Метилнонан	96,13	142,28	0,887
612	4-Метилнонан	96,29	142,28	0,887
614	2-Метилнонан	96,49	142,28	0,887
616	1-Этил-2-метилбензол	96,77	120,20	0,832
618	3-Этилоктан	97,01	142,28	0,887
620	Нафтен	97,14	140,27	0,874
622	3-Метилнонан	97,47	142,28	0,887
624	C ₁₀ -олефин	97,69	140,27	0,874
626	C ₁₀ -парафин	97,83	142,28	0,887
628	C ₁₀ -парафин	98,16	142,28	0,887
630	1,2,4-Триметилбензол	98,49	120,20	0,832
632	C ₁₀ -парафин	98,74	142,28	0,997
634	C ₁₀ -парафин	98,90	142,28	0,887
636	Изобутилциклогексан	99,10	140,27	0,874
638	C ₁₀ -парафин	99,09	142,28	0,887
640	C ₁₀ -парафин	99,22	142,37	0,887
642	1-Децен	99,52	140,27	0,874
644	C ₁₀ -парафин	99,66	142,28	0,887
646	C ₁₀ -парафин	99,70	142,28	0,887
648	C ₁₀ -ароматические углеводороды	99,75	134,22	0,837
650	C ₁₀ -парафин	99,82	142,28	0,887
652	Нафтен	99,93	140,27	0,874
654	Изобутилбензол	100,06	134,22	0,837
656	<i>транс</i> -1-Метил-2-пропилциклогексан	100,09	140,27	0,874
658	C ₁₀ -парафин	100,19	142,28	0,887
660	<i>втор</i> -Бутилбензол	100,28	134,22	0,837
662	<i>n</i> -Декан	100,40	142,28	0,887
664	C ₁₁ -парафин	100,67	156,32	0,886
666	C ₁₁ -парафин	100,85	156,32	0,886
668	1,2,3-Триметилбензол	101,28	120,20	0,832
670	1-Метил-3-изопропилбензол	101,40	134,22	0,837
672	C ₁₁ -парафин	101,55	156,32	0,886
674	1-Метил-4-изопропилбензол	101,73	134,22	0,837

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWt	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
676	C ₁₁ -парафин	102,06	156,32	0,886
678	C ₁₁ -парафин	102,05	156,32	0,886
680	2,3-Дигидроинден	102,42	118,17	0,819
682	втор-Бутилциклогексан	102,57	140,27	0,874
684	C ₁₁ -парафин	102,87	156,32	0,886
686	1-Метил-2-изопропилбензол	103,03	134,22	0,837
688	3-Этилнонан	103,26	156,32	0,886
690	C ₁₁ -парафин	103,37	156,32	0,886
692	Нафтен	103,55	140,27	0,874
694	C ₁₁ -парафин	103,88	126,19	0,886
696	1,3-Диэтилбензол	104,08	134,22	0,837
698	1-Метил-3-пропилбензол	104,35	134,22	0,837
700	1,4-Диэтилбензол	104,57	134,22	0,837
702	1-Метил-4-пропилбензол	104,73	134,22	0,837
704	Бутилбензол	104,85	134,22	0,837
706	3,5-Диметил-1-этилбензол	105,00	134,22	0,837
708	1,2-Диэтилбензол	105,26	134,22	0,837
710	C ₁₁ -парафин	105,39	156,32	0,886
712	C ₁₀ -ароматические углеводороды	105,49	134,22	0,837
714	C ₁₀ -ароматические углеводороды	105,64	134,22	0,837
716	C ₁₀ -ароматические углеводороды	105,75	134,22	0,837
718	1-Метил-2-пропилбензол	105,85	134,22	0,837
720	C ₁₀ -ароматические углеводороды	105,95	134,22	0,837
722	5-Метилдекан	106,11	156,32	0,886
724	4-Метилдекан	106,26	156,32	0,886
726	2-Метилдекан	106,39	156,32	0,886
728	C ₁₁ -парафин	106,55	156,32	0,886
730	1,4-Диметил-2-этилбензол	106,76	134,22	0,837
732	1,3-Диметил-4-этилбензол	106,93	134,22	0,837
734	C ₁₁ -парафин	107,06	156,32	0,886
736	3-Триметилдекан	107,27	156,32	0,886
738	C ₉ -индан	107,35	132,00	0,837
740	1,2-Диметил-4-этилбензол	107,46	134,22	0,837
742	C ₁₁ -парафин	107,76	156,32	0,886
744	1,3-Диметил-2-этилбензол	108,01	134,22	0,837
746	C ₁₁ -парафин	108,58	156,32	0,886
748	C ₁₁ -парафин	108,75	156,32	0,886
750	1-Метил-4-трет-бутилбензол	108,98	148,25	0,840
752	1,2-Диметил-3-этилбензол	109,17	134,22	0,837
754	1-Этил-2-изопропилбензол	109,50	148,26	0,840
756	n-Ундекан	109,62	156,32	0,886
758	1-Этил-4-изопропилбензол	109,80	148,25	0,840
760	C ₁₂ -парафин	109,96	170,34	0,885
762	1,2,4,5-Тетраметилбензол	110,15	134,22	0,837
764	2-Метилбутилбензол	110,55	148,25	0,840
766	1,2,3,5-Тетраметилбензол	110,43	134,22	0,837
768	3-Метилбутилбензол	110,64	148,25	0,840
770	C ₁₁ -ароматические углеводороды	110,74	148,25	0,840
772	C ₁₂ -парафин	110,84	170,34	0,885
774	C ₁₁ -ароматические углеводороды	110,94	148,25	0,840
776	C ₁₁ -ароматические углеводороды	111,05	148,25	0,840

Продолжение таблицы А1.1

Номер лика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекуляр- ная масса MWt	Расчетный коэф- фициент отклика (см. 10.3)
778	C ₁₁ -ароматические углеводороды	111,12	148,25	0,840
780	1-трет-Бутил-2-метилбензол	111,56	148,25	0,840
782	C ₁₁ -ароматические углеводороды	111,65	148,25	0,840
784	1-Этил-2-пропилбензол	111,76	148,25	0,840
786	C ₁₁ -ароматические углеводороды	112,00	148,25	0,840
788	C ₁₁ -ароматические углеводороды	112,22	148,25	0,840
790	C ₁₁ -ароматические углеводороды	112,34	148,25	0,840
792	1-Метил-3-бутилбензол	112,52	148,25	0,840
794	C ₁₁ -ароматические углеводороды	112,63	148,25	0,840
796	1,2,3,4-Тетраметилбензол	112,79	148,25	0,840
798	Пентилбензол	113,17	148,25	0,840
800	транс-1-Метил-2-(4-метилпентил)-циклопентан	113,44	168,33	0,874
802	C ₁₁ -ароматические углеводороды	113,74	148,25	0,840
804	C ₁₁ -ароматические углеводороды	113,85	148,25	0,840
806	C ₁₁ -ароматические углеводороды	114,02	148,25	0,840
808	C ₁₂ -парафин	114,12	170,34	0,885
810	1,2,3,4-Тетрагидронафталин	114,17	132,09	0,824
812	1-трет-Бутил-3,5-диметилбензол	114,32	162,30	0,843
814	Нафталин	114,65	128,06	0,799
816	1,1-Диметилиндан	114,94	146,10	0,829
818	1,2-Диметилиндан	115,19	146,10	0,829
820	1,6-Диметилиндан	115,33	146,10	0,829
822	C ₁₁ -ароматические углеводороды	115,55	148,25	0,885
824	1-Этилиндан	115,65	146,10	0,829
826	2-Этилиндан	115,88	146,10	0,829
828	Этил-1,3,5-триметилбензол	116,00	148,25	0,884
830	1,3-Дипропилбензол	116,21	162,34	0,843
832	n-Додекан	116,55	170,34	0,885
834	Этил-1,2,4-триметилбензол	116,69	148,25	0,840
836	C ₁₁ -ароматические углеводороды	117,07	148,25	0,840
838	C ₁₁ -ароматические углеводороды	117,19	148,25	0,840
840	C ₁₁ -ароматические+C ₂ -индан	117,55	162,30	0,843
842	2,4-Диметилиндан	117,99	146,10	0,829
844	4-Этилиндан	118,13	146,10	0,829
846	1-трет-Бутил-4-этилбензол	118,59	162,30	0,843
848	1,3-Диметилиндан	119,07	146,10	0,829
850	1-Метил-4-пентилбензол	119,60	162,30	0,843
852	4,7-Диметилиндан	119,65	146,10	0,829
854	5,6-Диметилиндан	119,70	146,10	0,829
856	C ₁₃ -ароматические углеводороды	119,77	162,30	0,843
858	Гексилбензол	119,87	162,30	0,843
860	C ₆ -бензол	119,93	162,30	0,843
862	C ₆ -бензол	119,98	162,30	0,843
864	C ₆ -бензол	120,20	162,30	0,843
866	4,5-Диметилиндан	120,30	146,10	0,829
868	C ₆ -бензол	120,80	163,30	0,843
870	2-Метилнафталин	121,42	142,08	0,806
872	C ₆ -бензол	121,65	162,30	0,843
874	C ₆ -бензол	121,85	162,30	0,843
876	n-Тридекан	122,06	184,22	0,884

Окончание таблицы А1.1

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания	Молекулярная масса MWt	Расчетный коэффициент отклика (см. 10.3)
878	1-Метилнафталин	122,28	142,08	0,806
880	C ₆ -бензол	122,40	162,30	0,843
882	C ₂ -тетралин	122,80	160,20	0,843
884	C ₆ -бензол	123,20	162,30	0,843
886	C ₆ -бензол	124,00	162,30	0,843
888	C ₁₃ -парафин	125,60	184,22	0,883
890	<i>транс</i> -7-Декан	126,34	140,20	0,874
892	<i>n</i> -Тетрадекан	126,60	198,34	0,883
895	2,6-Диметилнафталин	126,84	156,30	0,812
900	2,7-Диметилнафталин	126,97	156,30	0,812
905	<i>n</i> -Тетрадекан	127,10	198,34	0,883
910	1,3-Диметилнафталин	127,52	156,30	0,812
915	1,6-Диметилнафталин	127,69	156,30	0,812
920	1,5-Диметилнафталин	128,44	156,30	0,812
925	1,4-Диметилнафталин	128,31	156,30	0,812
930	Аценафталин	129,05	156,30	0,801
940	1,2-Диметилнафталин	129,92	156,30	0,812
950	<i>n</i> -Пентадекан	131,10	212,34	0,883

Примечания

1 Используемые наименования компонентов аналогичны наименованиям в других таблицах. Изменения были внесены в тех случаях, когда данные газовой хроматографии — масс-спектрометрии не соответствовали наименованию пика или его времени удерживания.

2 *n*-Пропанол элюируется совместно с 3М-1С5=.

3 МТБЭ элюируется совместно с 23DM-1С4=.

4 МВБЭ элюируется совместно с 1-гексаном.

5 ЭТБЭ элюируется совместно с 23DM-13С4=.

6 Изобутанол элюируется совместно с 44DM-1С5=.

7 2,3,3-Триметилпентан элюируется совместно с толуолом, если соотношение с толуолом больше 5:1.

8 Совместно элюируемые олефины из примечаний 2—6 обычно присутствуют на уровне менее 1000 ppm.

9 В некоторых случаях химическая группа известна, но структура не определена (например, C₆-олефин — положение двойной связи неизвестно).

10 Относительный коэффициент отклика для шести основных оксигенатов установлен на основании усреднения результатов по семи лабораториям, проанализировавшим двукратно шесть образцов. Эти же образцы были использованы для определения линейности метанола, этанола, *трет*-бутанола, МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ в концентрациях от 1 % масс. до 30 % масс.

А1.2 В таблице А1.2 представлены показатели повторяемости и воспроизводимости, полученные статистической обработкой данных в соответствии с научно-исследовательским отчетом Д02-1007. Процесс установления квалификации для определения точностных требований следующий.

А1.2.1 Для каждого компонента, для которого устанавливают прецизионность, необходимо, чтобы он присутствовал не менее чем в шести образцах и определялся не менее чем в шести лабораториях хотя бы однократно.

А1.2.2 Отношение стандартного отклонения повторяемости к среднему значению для каждого компонента (образца) должно быть менее или равно 0,1.

Таблица А.1.2 — Повторяемость и воспроизводимость определения индивидуальных углеводородов (ИНА)

ГХ-МС	Номер в соответствии с А.1.2	Номер компонента на хроматограмме по методу ИНА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$R_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{ниж}}$)	$r_{\text{ниж}}$ (оценка погрешности в процентах концентрации)	$r_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{верх}}$)	$R_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{ниж}}$)	$R_{\text{верх}}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{верх}}$)	$C_{\text{ниж}}$ (минимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{ниж}}$ и $R_{\text{ниж}}$)	$C_{\text{верх}}$ (максимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{верх}}$ и $R_{\text{верх}}$)
A	6	6	iC4	9,8	1,4	17,7	24,9	30,7	37,3	0,04	2,86
A	9	9	1C4=	10,4	16,7	25,1	28	36	45,4	0,01	0,14
A	11	12	nC4	10	12	14,2	27,1	31,7	36,6	0,92	8,51
A	12	14	12C4=	12,1	15,7	19,8	28,2	36,8	47,1	0,03	0,31
A	14	18	c2C4=	14,2	15,4	16,7	25,2	31,1	37,9	0,03	0,29
A	20	24	3M1C4=	7,3	9,6	12,3	17,2	19,9	22,7	0,02	0,11
A	22	26	iC5	4,6	5,4	6,3	13,4	15,5	17,9	2,39	12,09
A	26	32	1C5=	5,9	7,5	9,4	17	20,6	24,7	0,06	0,4
A	28	36	2M1C4=	4,4	6,3	8,6	14,5	17,5	20,9	0,14	0,8
A	30	38	nC5	4,2	6,2	8,7	13,9	16,1	18,5	1	5,18
A	34	42	12C5=	4,1	6,3	9,1	13	17,3	22,6	0,27	1,08
A	38	46	c2C5=	5,2	7,7	11	14,4	18,3	22,9	0,15	0,59
A	40	50	2M2C4=	3,9	6,2	9,2	15,2	18,1	21,4	0,44	1,78
A	42	52	113C5=	4,5	10,2	19,6	22,1	31,1	42,2	0,01	0,05
A	52	62	222DMC4	2,9	3,7	4,7	9,8	12,9	16,6	0,07	2,16
A	54	64	cYC5=	4,6	9	15,5	15,6	20,3	25,9	0,07	0,25
A	56	66	4M1C5=	11,2	14,8	19	22,6	31,8	43,2	0,02	0,1
A	58	68	3M1C5=	8,3	12,1	17	37,1	50,5	66,8	0,04	0,12
A	62	72	cYC5	2,5	4,7	7,7	11,8	13,4	15,1	0,07	0,69
A	64	74	23DMC4	1,7	2,7	3,9	8,6	9,8	11,1	0,53	1,91
A	66	76	MTB9	1,9	3,2	5	9,1	12,3	16,2	0,12	15,73
A	70	80	c4M2C5=	5,1	7,1	9,7	27,4	43,7	65,4	0,02	0,09
A	74	82	2MC5	2,2	2,9	3,8	9,3	11	12,9	1,03	5,62
A	76	84	14M2C5=	4,9	6,3	7,9	16,9	20,2	23,9	0,05	0,26

Продолжение таблицы А1.2

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1.2	Номер компонента на хроматограмме по методу ИА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$r_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{ниж}}$)	$r_{\text{пов}}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$r_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{верх}}$)	$R_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{ниж}}$)	$R_{\text{пов}}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{верх}}$)	$C_{\text{ниж}}$ (минимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{ниж}}$ и $R_{\text{ниж}}$)	$C_{\text{верх}}$ (максимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{верх}}$ и $R_{\text{верх}}$)
A	80	88	3МС5	2	2,7	3,5	7,7	9,1	10,7	0,58	3,25
A	84	92	2М1С5=	3,6	5,1	7	9,6	12,5	16,1	0,09	0,45
A	86	94	1С6=	3,9	6,4	9,9	15,1	19,9	25,7	0,04	0,26
A	96	104	пС6	2,5	4,6	7,7	11	13,3	15,8	0,25	3,23
A	98	106	с3С6=	4,4	6,5	9,1	12,5	16,3	20,9	0,08	0,48
A	102	110	13С6+С6=,=	2,9	5,2	8,4	9,4	12,4	15,9	0,17	0,93
A	103	112	2М2С5=	2,7	4,7	7,4	9,9	12	14,4	0,15	0,77
A	104	114	3МСуС5=	7,8	11,3	15,9	22,7	25,2	28	0,02	0,11
A	105	116	13М2С5=	4,3	6,9	10,2	10,1	12,5	15,4	0,1	0,48
A	106	118	с2С6=	4,1	6,7	10,2	14,3	17,4	21	0,07	0,4
A	109	122	с3М2С5=	3,1	4,5	6,4	9,1	10,5	12,1	0,14	0,75
A	112	128	МСуС5	2,4	3,3	4,4	9,1	10,1	11,1	0,36	2,34
A	116	138	24ДМС5	1,8	2,7	3,9	8	10,1	12,4	0,2	1,93
A	118	142	223ТМС4	0,5	4,1	14,3	20,9	35,2	54,8	0,01	0,06
A	124	150	С7=,=	0	3,1	16,6	11,3	19,1	29,9	0,01	0,04
A	128	154	Метилциклопентан	5,5	9,1	14,1	14,9	20,3	26,8	0,01	0,03
A	130	156	Бензол	2,6	4,7	7,8	11,5	13,8	16,5	0,15	1,86
A	131	158	1-Метилциклопентен	4,3	6,3	8,9	18,5	24,1	30,7	0,17	0,92
A	133	162	с2m3С6	0	1,2	6,8	17	29,1	45,9	0,01	0,06
A	134	164	33ДМС5+5М1С6=	2,3	3,9	6,2	8,5	14,8	23,6	0,02	0,22
A	136	166	сУС6	3,3	4,4	5,7	11,3	12,8	14,5	0,04	0,87
A	138	168	12М3С6=	4,2	8,4	14,7	84,2	103,2	124,8	0,02	0,32
A	146	176	12e3m1C4	3,2	5,7	9,1	20,8	29,6	40,8	0,02	0,19
A	148	178	4М1С6=	0,1	2,4	11,5	16,8	29,3	46,6	0,01	0,05
A	154	184	4М2С6=	3	4,5	6,4	15,9	18,7	21,8	0,03	0,29

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1 2	Номер компонента на хроматограмме по методу ВНА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$R_{пл}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{пл}$)	$R_{пов}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$R_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{верх}$)	$R_{мин}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{мин}$)	$R_{оц}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{верх}$)	$S_{мин}$ (минимальная концентрация для которой применимы $R_{пл}$ и $R_{пов}$)	$S_{макс}$ (максимальная концентрация для которой применимы $R_{пл}$ и $R_{пов}$)
A	156	186	2M3C6+C7=	1,4	2,1	3	6,2	7,7	9,5	1,09	3,54
A	160	190	суС6=	3,9	7,2	12,1	30,1	45,4	65,2	0,02	0,13
A	166	198	3M3C6	1,3	2	2,8	8,5	9,9	11,5	0,36	2,38
A	172	204	113DMсуС5	1,7	2,4	3,3	10,5	11,3	12,2	0,12	0,6
A	174	206	с13DMсуС5	1,9	2,7	3,6	9,8	10,7	11,6	0,09	0,49
A	176	208	112DMсуС5	2,2	3,2	4,3	7,6	9,1	10,8	0,05	0,46
A	180	210	3EC5	2,8	4,8	7,6	10	13,4	17,6	0,02	0,21
A	184	212	5M-1-C6=	1,8	5	10,6	24,1	35,2	49,1	0,03	0,19
A	186	214	224TMC5	2,3	3,4	4,9	7,6	13,2	21,1	0,09	23,25
A	188	218	1C7=	4,3	6,8	10,1	15,8	20,9	26,9	0,02	0,13
A	189	220	C7=	5,2	7,8	11,1	15,1	18,3	22	0,02	0,13
A	194	226	C7=	3,3	4,8	6,8	16,6	20,7	25,2	0,02	0,16
A	196	228	C7=, =	3,7	5	6,5	12,5	17,2	22,8	0,04	0,31
A	197	230	C7=, =	5,6	7,3	9,3	19,5	23	26,9	0,04	0,26
A	198	232	C7=	3,8	4,7	5,7	42,9	60,4	82,1	0,05	0,45
A	200	234	nc7	1,5	2,2	3,2	7,4	8,9	10,7	0,13	1,55
A	202	236	c3C7=	2,1	3	4,2	14,2	18,2	23	0,04	0,36
A	204	238	2M2C6=	2,1	3	4,3	14,4	16,5	18,7	0,05	0,43
A	206	240	c3M3C6=	3,3	4,5	6,1	21	24,9	29,3	0,03	0,29
A	208	242	13C7=	1,8	2,7	4	12,9	15,2	17,8	0,04	0,35
A	210	244	3E2C5=	0,1	1,2	5,4	13,4	16,6	20,4	0,02	0,13
A	212	246	1,5D MсуС5=	3	5	7,8	10,3	16,2	24	0,03	0,27
A	214	248	12M3C6=	2,8	3,6	4,7	13,8	17,9	22,9	0,04	0,33
A	218	252	23DM2C5=	3,1	4	5	9,1	13	17,8	0,04	0,56

Продолжение таблицы А1 2

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1 2	Номер компонента в хроматограмме по методу ВНА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$t_{пл}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $t_{ав}$)	$t_{от}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$t_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $t_{ав}$)	$R_{пл}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $t_{ав}$)	$R_{от}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $t_{ав}$)	$C_{пл}$ (минимальная концентрация для которой применимы $t_{от}$ и $R_{от}$)	$C_{верх}$ (максимальная концентрация для которой применимы $t_{от}$ и $R_{от}$)
А	222	256	МсУС6	1,9	2,6	3,6	8,5	9,9	11,5	0,16	1,44
А	224	260	113ТМСУС5	1,7	5,1	11,5	10,8	14,4	18,7	0,01	0,09
А	226	262	22ДМС6	4,7	9,2	15,9	12,9	23,2	38,1	0,01	0,07
А	234	270	ЕсУС5	2,5	3,6	5	9,6	13,5	18,4	0,04	0,3
А	240	276	223ТМС5	2,2	4,9	9,3	14,1	27,3	46,7	0,02	0,54
А	245	278	25ДМС6+С8=	1,5	2,8	4,7	6,3	8,1	10,3	0,17	1,58
А	250	280	24ДМС6	1,8	2,9	4,5	6,1	8,1	10,4	0,25	2,19
А	260	284	1с124ТМСУС5	2,4	3,7	5,4	10,8	15,1	20,5	0,03	0,16
А	265	286	3,3ДМС6+С8	1,3	5,4	14,1	8,7	14,8	23,2	0,01	0,07
А	278	292	1с123ТМСУС5	6,1	11,5	19,5	40,9	70	110,3	0,03	0,09
А	290	298	С ₈ -олефины	0,3	3,2	11,8	15,5	20,3	26,1	0,02	0,23
А	292	300	234ТМС5	1,9	3,2	5	8,7	12	16	0,09	9,14
А	294	302	С ₇ -диолефин	2,9	4,2	5,8	19,2	41,1	75,2	0,06	0,51
А	300	304	Толуол	1,7	3,1	5,3	8,7	16,6	28,2	2,52	13,14
А	312	316	О ₈ -олефин	3,9	6	8,7	26	35,7	47,6	0,02	0,2
А	314	320	23ДМС6	2,2	3,5	5,2	16,1	30,6	51,9	0,18	2,06
А	316	322	2МЗЕС5	2,3	4,5	7,9	21,3	40	67,2	0,03	0,31
А	318	324	112ТМСУС5+С7-диолефин	0,4	3,3	11,8	26,6	33,7	42	0,02	0,23
Ал	326	332	2МС7	3,3	4,4	5,9	8,4	11,2	14,5	0,14	0,93
А	328	334	4МС7	3,5	5,6	8,3	12,5	24,4	42,4	0,15	0,5
А	334	340	с13ДМСУС6	3,7	4,8	6,2	18,7	32,6	52,1	0,04	0,25
А	336	344	3МС7	2,3	3,3	4,5	17,8	21,9	26,5	0,15	1,04
А	338	346	3ЕС6	4,1	6,4	9,4	34,8	53	76,7	0,04	0,21
А	352	360	с1Е3МСУС5	3,1	4,3	5,7	8,6	23,2	48,7	0,09	2,32

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1.2	Номер компонента на хроматограмме по методу ИА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$r_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{ниж}}$)	$r_{\text{оц}}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$r_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{верх}}$)	$R_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{ниж}}$)	$R_{\text{оц}}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{верх}}$)	$C_{\text{ниж}}$ (минимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{ниж}}$ и $R_{\text{ниж}}$)	$C_{\text{верх}}$ (максимальная концентрация, для которой применимы $r_{\text{верх}}$ и $R_{\text{верх}}$)
A	356	364	1E3McyC5	3,8	5,1	6,7	24,4	35,5	48,7	0,03	0,21
A	360	366	1E2McyC5	4,5	7,7	12,3	32,3	54,1	84,1	0,02	0,11
A	362	368	1M1EcyC5	0,2	3,1	12,5	24,1	33,3	44,7	0,01	0,08
A	366	372	C8=	7,2	9,9	13,3	27,1	37	49	0,01	0,08
A	368	374	12DMcyC6	2,2	4,8	9	63,9	97,3	140,6	0,02	0,15
A	372	378	C ₈ -олефины	3,4	5,3	7,9	109,3	124,4	141	0,02	0,26
A	374	380	1-3-C ₈ -олефин	0	1,5	9,4	50,8	67,2	86,9	0,02	0,12
A	380	382	C ₈ -олефин	3,6	5,4	7,9	21,1	38,9	64,7	0,03	0,33
A	385	384	13DMcyC6	3,1	5,4	8,4	34,1	48,5	66,5	0,04	0,31
A	400	388	nC8	3	3,7	4,5	8,8	11,9	15,6	0,1	0,89
A	406	394	12C8=	3	6,5	12,2	45,6	72,5	108,4	0,02	0,28
A	408	396	1PcyC5	5,8	7,4	9,3	31,7	50,8	76,5	0,03	0,36
A	416	404	C9=	0,3	2,9	9,9	46,9	63,8	84,4	0,02	0,14
A	422	410	C ₉ -олефины	4,8	8	12,4	30,5	43,2	58,9	0,02	0,17
A	432	420	12DMcyC6	3,4	4,9	6,8	22,1	39,3	63,8	0,04	0,39
A	434	422	24DMC7	5,6	9,9	15,9	54,5	105,5	181,2	0,02	0,09
A	436	424	C9=	1,9	6	13,7	34,7	47,5	63,1	0,01	0,07
A	438	426	C9=	4,1	6,6	10	19	27,7	38,7	0,02	0,11
A	440	428	EcyC6	2,7	5	8,2	14,1	22	32,5	0,03	0,28
A	444	432	2M4EC6	7,7	11,1	15,3	20,2	27,4	36	0,01	0,03
A	446	434	26DMC7	5,9	7,3	8,9	21,9	27,7	34,4	0,03	0,14
A	450	438	114TMcyC6	5,9	8,2	11	28	42,1	60,3	0,03	0,21
A	458	446	25&35DMC7	3,7	5,9	8,7	10,5	14,9	20,5	0,07	0,25
A	460	448	C9=S	3,3	8,4	17,1	40,1	56,4	76,6	0,01	0,07

Продолжение таблицы А1 2

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1 2	Номер компонента на хроматограмме по методу ВНА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$r_{пл}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{95\%}$)	$r_{пов}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$r_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{95\%}$)	R_{min} (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{95\%}$)	$R_{оц}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{95\%}$)	C_{min} (минимальная концентрация для которой применимы $r_{95\%}$ и $R_{95\%}$)	C_{max} (максимальная концентрация для которой применимы $r_{95\%}$ и $R_{95\%}$)
A	462	450	33DMC7	0,1	3,3	15,7	25	44	70,9	0,01	0,05
A	475	460	Этилбензол	2,8	3,9	5,4	7,2	8,9	10,9	0,66	3,12
A	480	464	T124TMsC6	6,9	10,9	16,3	84,7	109,3	138,2	0,02	0,15
A	500	474	Метаксилол	2,7	3,7	5	7,5	9,2	11	1,67	7,93
A	502	476	Параксилол	3,1	4,4	5,9	8,8	11,6	14,8	0,63	3,26
A	503	478	23DMC7	5,1	7,6	10,9	45,3	73,5	111,5	0,03	0,16
A	504	480	35DMC7	7,2	9,8	13	44,1	82,8	139,2	0,02	0,07
A	506	482	34DMC7	6,5	10,1	15	42,5	67,7	101,4	0,02	0,07
A	510	486	3M3EC6	6,3	10	15	38	61	92	0,02	0,14
A	518	492	4MC8+C9-олефин	4,1	5,9	8,1	12,4	14,3	16,3	0,05	0,3
A	520	494	2MC8	4,4	5,9	7,7	12,4	15,9	20,1	0,07	0,38
A	522	496	C9-олефин	6,8	10,6	15,7	22,3	33,3	47,4	0,01	0,1
A	528	502	3EC7	4,5	6,8	9,8	24,7	34,4	46,3	0,02	0,11
A	530	504	3MC8	5	8	12	12,4	17,9	24,9	0,08	0,45
A	550	512	орто-Ксилол	2,1	3	4,1	7,7	9,8	12,3	0,92	4,18
A	564	518	C9P	3,1	6,6	12	31,1	50,4	76,3	0,01	0,37
A	568	522	11E4MsC6	6,5	9,7	13,8	26,3	46,1	74,1	0,02	0,13
A	570	524	с1E4MsC6	4,7	7,4	10,8	22,1	35,8	54,2	0,02	0,15
A	572	526	C9P	4,5	7,2	10,7	28,7	55,7	95,9	0,03	0,6
A	582	532	C9P	7,5	11,1	15,6	16,9	23,1	30,8	0,02	0,24
A	586	534	13C9=	4,6	9,1	16	27,3	38,8	53,2	0,01	0,16
A	590	536	с3C9=	7,1	11,1	16,4	23,5	36,1	52,7	0,01	0,17
A	600	540	nC9	5,8	7,2	8,7	18,3	30	45,8	0,1	0,51
A	606	546	1M1EcC6	0,4	3,1	10,7	46,2	75,8	116	0,02	0,11

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1 2	Номер компонента на хроматограмме по методу ВИА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$t_{пл}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $t_{95\%}$)	$t_{оц}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$t_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $t_{95\%}$)	$R_{мин}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $t_{95\%}$)	$R_{оц}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $t_{95\%}$)	$C_{мин}$ (минимальная концентрация для которой применимы $t_{95\%}$ и $R_{95\%}$)	$C_{макс}$ (максимальная концентрация для которой применимы $t_{95\%}$ и $R_{95\%}$)
A	608	548	1M2PrcyC5	0,2	3	12,2	19,2	30,1	44,5	0,01	0,1
A	616	556	iPrcyC6	4,3	6,9	10,4	11,2	18,9	29,6	0,04	0,41
A	626	566	sPrcyC6	4,4	7,7	12,4	21,8	40,2	66,9	0,01	0,35
A	636	576	sVucyC5	0,5	4,5	16,1	22,9	36,7	55,1	0,01	0,06
A	638	578	PrcyC6	4	7,3	12	77,9	96,8	118,6	0,02	0,12
A	644	584	26DMC8	4,6	8,6	14,4	41,2	68,2	105	0,03	0,23
A	646	586	36DMC8	4,5	7,7	12,3	31,6	40,4	50,8	0,03	0,11
A	651	592	nPrcyC6	3,5	5,8	9	11,6	17,3	24,6	0,21	0,83
A	655	600	1E3Mbenz	2,8	4,5	6,9	6,5	8,3	10,3	0,85	2,8
A	656	602	1E4Mbenz	3,1	4,5	6,3	7,8	9,7	11,9	0,36	1,26
A	658	606	135TMbenz	3,4	5,8	9,1	8,5	12,5	17,7	0,46	1,53
A	660	610	5MC9	10,9	12,9	15,1	76,7	104,7	138,8	0,02	0,13
A	661	612	4MC9	7,1	10,2	14	29,7	44,5	63,5	0,02	0,13
A	662	614	2MC9	4,4	7,1	10,9	14,9	24,2	36,6	0,1	2,07
A	663	616	1E2Mbenz	3,6	5,5	8,1	10,3	15,9	23,2	0,3	1,1
A	668	622	3MC9	7,2	12,9	21	41,8	59	80,3	0,04	0,19
A	671	626	C10-P	0,5	5,4	19,5	30,3	52,1	82,6	0,01	0,47
A	673	630	1,2,4-Триметилбензол	2,8	4,7	7,4	9,3	12,5	16,4	1,29	4,65
A	674	632	C10-P	7,1	12,9	21,4	35,6	61,2	155,1	0,01	0,32
A	675	634	C10P	2,6	6,2	12,3	25,2	55,1	102,4	0,01	0,34
A	684	648	C10A	5,2	9,3	15,1	22,8	38,2	59,4	0,01	0,3
A	688	652	Нафтен	4,8	7,5	11	40,2	63,2	93,7	0,03	0,27
A	700	662	nC10	7,3	8,9	10,7	14,3	29,5	52,8	0,07	0,29
A	705	668	1,2,4-Триметилбензол	4	6,3	9,2	18,2	23,2	29,1	0,28	1,15

Продолжение таблицы А1 2

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1 2	Номер компонента на хроматограмме по методу ВНА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$r_{пл}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{пл}$)	$r_{пов}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$r_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{верх}$)	$r_{ниж}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{ниж}$)	$R_{пов}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{верх}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{верх}$)	$C_{пл}$ (минимальная концентрация для которой применимы $r_{пл}$ и $R_{пов}$)	$C_{верх}$ (максимальная концентрация для которой применимы $r_{верх}$ и $R_{верх}$)
A	708	674	1M4Pbenz	3	6,6	12,1	22	34,2	50,1	0,01	0,08
A	709	676	C11P	5,1	8,9	14,1	34,9	68,2	118,1	0,02	0,12
A	712	680	Индан	4	6,6	10,1	15,7	23,6	33,6	0,15	0,4
A	714	682	sBucyC6	8,7	12,7	17,6	46,7	70,2	100,5	0,01	0,06
A	718	686	1M2Pbenz	4,6	8,4	13,7	48	88,1	146	0,02	0,33
A	723	694	C11P	5	7,8	11,4	29,6	60,7	108,3	0,02	0,19
A	724	696	13DEbenz	4,6	6,1	8	11,1	19,5	31,5	0,07	0,22
A	725	698	1M3Pbenz	3,5	5,2	7,3	8,5	13	18,8	0,18	0,71
A	727	702	1M4Pbenz	4,8	7,8	11,7	16,7	22,8	30,2	0,1	0,35
A	728	704	Bubenz	7,2	11	16,1	15,8	21,8	29,3	0,04	0,14
A	729	706	35DM1EBenz	3,5	6,4	10,5	9,1	14	20,3	0,18	0,56
A	730	708	12DEbenz	6,4	9,7	14	38,6	57,4	81,4	0,02	0,09
A	740	718	1M2Pbenz	6,8	10,7	15,8	27,3	41,7	60,4	0,06	0,21
A	746	722	5MC10	7,1	11,5	17,5	30,8	44,5	61,8	0,02	0,08
A	748	724	4MC10	4,2	6,9	10,4	15,3	32,1	57,9	0,01	0,68
A	750	726	2MC10	6,5	9,5	13,3	52,7	68,9	88,2	0,02	0,15
A	756	730	14DM2EBenz	4,1	6,1	8,7	17,4	26,3	37,9	0,12	0,42
A	758	732	13DM4EBenz	4,5	6,2	8,3	18,5	22,9	27,8	0,12	0,54
A	762	736	3MC10	10,9	15,7	21,7	35,8	54,5	78,8	0,02	0,17
A	764	740	12DM4EBenz+C1indane	3,1	5,3	8,5	8,2	12,5	18,2	0,27	0,75
A	768	744	13DM2EBenz	6,2	9,6	14	37,9	68,9	113,3	0,03	0,35
A	780	750	1M41Bubenz	6,1	10,3	16,1	45,8	83,5	137,7	0,03	0,11
A	785	752	12DM3EBenz	4,1	7,3	11,7	28,2	45,3	68,2	0,09	0,2
A	800	756	nC11	8,7	11,1	13,9	31,2	40,2	50,6	0,04	0,21

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1.2	Номер компонента на хроматограмме по методу ИА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$r_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{ниж}}$)	$r_{\text{оц}}$ (оценка повторяемости в процентах концентрации)	$r_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{верх}}$)	$R_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{ниж}}$)	$R_{\text{оц}}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{верх}}$)	$C_{\text{ниж}}$ (минимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{ниж}}$ и $R_{\text{ниж}}$)	$C_{\text{верх}}$ (максимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{верх}}$ и $R_{\text{верх}}$)
A	806	762	1245tertM-benz	5,4	6,8	8,6	12,3	16,8	22,2	0,12	0,39
A	810	766	1235tertM-benz	4,7	7,7	11,6	12,7	19,9	29,3	0,16	0,56
A	824	782	C11A	8,7	11,3	14,2	32,9	55,6	86,9	0,02	0,07
A	826	784	1E2P-benz	5	7,5	10,7	14,2	25,2	40,8	0,09	0,44
A	828	786	C11A	8,5	11,8	15,7	23,4	35,1	50,3	0,02	0,1
A	830	788	C11A	8,8	12,3	16,7	35,7	49,9	67,5	0,02	0,1
A	832	790	C11A	9,7	13,4	17,8	22,9	39,6	63	0,02	0,1
A	834	792	1M3Bubenz	5,6	7,9	10,9	11,1	14,8	19,2	0,08	0,35
A	836	796	1234tetraM-benz+C11A	6,8	9,3	12,5	24,4	36,5	52,1	0,1	0,28
A	840	800	11M2(4MC5)cyC5	10,2	15,5	22,3	41	56,7	75,8	0,02	0,11
A	844	804	C11A	9,1	13,5	19	34	54,7	82,5	0,02	0,07
A	846	806	C11A	9,6	13,6	18,5	65,6	96,4	135,5	0,02	0,08
A	854	812	1B _u 35DMbenz	11,2	15,5	20,7	36,6	62,3	97,7	0,02	0,1
A	858	814	Нафталин	4,9	6,7	8,9	15,3	25,8	40,3	0,12	0,52
A	862	817	C11A	9,7	14,4	20,5	46,5	66,5	91,4	0,02	0,16
A	870	820	16DMINDANE	9	12,3	16,3	25,7	42,6	65,8	0,02	0,17
A	875	822	C11A	15,6	19,4	23,8	43,8	68,4	100,9	0,02	0,09
A	884	824	ZETHYLINDANE	5,8	9,8	15,4	18,4	29	42,9	0,03	0,19
A	888	826	2ETHYL13TMBZ	7,9	12,8	19,5	39,4	59,9	86,6	0,01	0,07
A	895	832	nC12	13,4	16,7	20,6	53,4	73,9	99,1	0,02	0,15
A	915	842	24DMINDANE	10,3	16,3	24,2	27,2	40	56,2	0,02	0,05
A	925	846	1B _u 4Ebenz	7,7	13,1	20,7	60,2	101,8	159,5	0,04	0,16
A	930	848	13DM INDANE	5,3	10,3	17,9	31,3	43	57,3	0,01	0,18
A	940	858	HEXYLbenz	9,8	15,1	21,9	61,2	96	141,8	0,01	0,13

Окончание таблицы А1.2

ГХ-МС	Номер в соответствии с А1.2	Номер компонента на хроматограмме по методу ИА	Аббревиатура или краткое наименование компонента	$r_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{ниж}}$)	$r_{\text{пов}}$ (оценка повторности в процентах концентрации)	$r_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $r_{\text{верх}}$)	$R_{\text{ниж}}$ (нижняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{ниж}}$)	$R_{\text{пов}}$ (оценка воспроизводимости в процентах концентрации)	$R_{\text{верх}}$ (верхняя 95%-ная граница достоверности $R_{\text{верх}}$)	$C_{\text{ниж}}$ (минимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{ниж}}$ и $R_{\text{ниж}}$)	$C_{\text{верх}}$ (максимальная концентрация для которой применимы $r_{\text{верх}}$ и $R_{\text{верх}}$)
А	942	870	2Mnaphthalene	6,4	8,9	12,1	17	21,6	27	0,04	0,64
А	947	879	1Mnaphthalene	7,5	11,6	16,9	25	29,8	35,2	0,02	0,27

А — Компоненты, которые были проверены методом ГХ-МС одним из участников круговых испытаний ASTM в 1996 г на одном из образцов.

Примечания

1 Обозначение сокращений дано в настоящей таблице.

2 В настоящей таблице используются аббревиатуры (краткие наименования компонентов), полные наименования указаны в таблице А1.1

3 Группа С₂-бензолы включает этилбензол, М-, О- и П-ксилолы.

4 Номера компонентов в графе «Номер в соответствии с А1.2» были использованы при статистическом анализе круговых испытаний в 1996 г. Номера перед наименованием компонента являются новыми номерами, используются в новом представлении ИА метода

A1.3 Замечания относительно оксигенатов:

Предупреждение — При проведении МСИ не были получены статистические данные для всех оксигенатов. Наибольшее количество статистических данных получено для МТБЭ.

Число образцов, включающих каждый индивидуальный оксигенат:

Оксигенат	Число образцов	Приблизительная область концентраций
Этанол	2	1 % и 12 %
Третбутанол	2	0,20 % и 1,0 %
МТБЭ	6	1 %, 2 %, 4 %, 8 % и 16 %
ЭТБЭ	1	0,50 %
ТАМЭ	1	15,00 %

A1.4 Показатели прецизионности для олефинов и циклопарафинов получены извлечением квадратного корня из полученных суммарных значений показателей прецизионности и умножением на коэффициент (r_{coef}) для повторяемости и коэффициент (R_{coef}) для воспроизводимости, приведенные ниже.

Тип	r_{min}	r_{coef}	r_{max}	R_{min}	R_{coef}	R_{max}	C_{min}	C_{max}
Циклопарафины	0,0726	0,08	0,098	0,286	0,384	0,586	2	10
Олефины	0,1555	0,18	0,21	0,382	0,555	1,012	2	25

A1.5 Прецизионность для ароматических соединений не зависит от уровня их содержания и приведена ниже (% масс.).

Тип	r_{min}	r	r_{max}	R_{min}	R	R_{max}	C_{min}	C_{max}
Ароматические соединения	0,8549	0,98	1,155	2,151	2,706	3,651	15	50

A1.6 Суммарные характеристики для парафинов, изопарафинов, бензолов C_2 и оксигенатов определялись согласно общей процедуре для индивидуальных компонентов. Статистические данные для групп приведены в таблице A1.3, где указаны повторяемость и воспроизводимость в зависимости от суммарных значений прецизионности. В то же время возможна значительная погрешность определения из-за совместного элюирования, содержания значительных количеств олефиновых или нефтяных компонентов или и тех, и других, более тяжелых, чем октан, и наличия неизвестных компонентов. Если требуются более точные результаты по групповому составу, которые находятся вне пределов вышеприведенных показателей прецизионности, то для некоторых или всех упомянутых групп компонентов следует использовать другой метод испытания.

Т а б л и ц а A1.3 — Суммарные значения прецизионности для бензинов, испытанных в МСИ, проводимых АСТМ в 1996 г.

Наименование	r_{min} (нижний предел повторяемости при 95%-ной доверительной вероятности r_{est})	r_{est} (оценка повторяемости в процентах от концентрации)	r_{max} (верхний предел повторяемости при 95%-ной доверительной вероятности r_{est})	R_{min} (нижний предел воспроизводимости при 95%-ной доверительной вероятности R_{est})	R_{est} (оценка воспроизводимости в процентах от концентрации)	R_{max} (верхний предел воспроизводимости при 95%-ной доверительной вероятности R_{est})	C_{min} (минимальная концентрация для которой применимы r_{est} и R_{est})	C_{max} (максимальная концентрация для которой применимы r_{est} и R_{est})
Парафин	0,0562	0,0646	0,08	0,125	0,186	0,373	1	20
Изопарафин	0,0209	0,024	0,03	0,047	0,065	0,102	20	65
Этилбензол	0,0334	0,0384	0,05	0,057	0,073	0,102	3	20
Оксигенаты	0,0418	0,0491	0,06	0,104	0,141	0,221	3	20

A2 Исследование линейности отклика оксигенатов

A2.1 Данная информация представлена в таблицах A2.1 — A2.14 и рисунках A2.1 — A2.6.

Т а б л и ц а A2.1 — Относительные коэффициенты отклика (RRF) оксигенатов

Оксигенат	Лаборатория № 1	Лаборатория № 2	Лаборатория № 3	Лаборатория № 4	Лаборатория № 5	Лаборатория № 6	Лаборатория № 7	Среднее значение RRF	Стандартное отклонение	Стандартное отклонение, %
Метанол	2,921	2,957	2,903	2,795	3,085	3,391	2,923	2,996	0,194	6,465
Этанол	1,997	2,043	2,003	2,057	2,138	2,354	2,014	2,087	0,127	6,1
трет-Бутанол	1,274	1,282	1,329	1,305	1,297	1,429	1,2	1,302	0,069	5,281
МТБЭ	1,508	1,523	1,552	1,791	1,508	1,658	1,498	1,577	0,109	6,932
ЭТБЭ	1,352	1,349	1,406	1,543	1,369	1,509	1,319	1,407	0,086	6,108
ТАМЭ	1,308	1,323	1,342	1,451	1,336	1,471	1,264	1,356	0,076	5,593

Примечание — Все RRF для $n-C_7 = 1,000$; в МСИ также используют значение коэффициента отклика.

Т а б л и ц а A2.2 — Бензол

Количество образцов	Бензол, % масс.	
	АСТМ Д 5580 ¹⁾	Настоящий стандарт
2	1,52	1,61
6	1,05	1,12
8	1,10	1,16
10	1,13	1,18
13	0,14	0,16
14	0,62	0,70
Среднее	0,93	0,99

Т а б л и ц а A2.3 — Тoluол

Количество образцов	Толуол, % масс.	
	АСТМ Д 5580 ¹⁾	Настоящий стандарт
2	4,3	4,6
6	2,1	1,9
8	10,1	11,4
10	5,0	6,1
13	3,3	2,9
14	4,4	5,3
Среднее	4,9	5,4

Т а б л и ц а A2.4 — Суммарное содержание ароматических углеводородов

Количество образцов	Суммарное содержание ароматических углеводородов, % масс.		
	АСТМ Д 5580 ¹⁾	Многомерный метод (ПИОНА)	Настоящий стандарт
2	30,3	28,2	32,6
6	18,9	18,7	20,0
8	49,1	49,0	51,0
10	23,9	24,5	25,4
13	19,7	19,8	22,4
14	23,8	24,6	27,5
Среднее	27,6	27,5	29,8

¹⁾ АСТМ Д 5580 «Бензин товарный. Определение бензола, толуола, этилбензола, *p/m*-ксилола, *o*-ксилола, C_9 и более тяжелых ароматических веществ методом газовой хроматографии» (ASTM D 5580 «Standard test method for determination of benzene, toluene, ethyl-benzene, *p/m*-xylene, *o*-xylene, C_9 and heavier aromatics, and total aromatics in finished gasoline by gas chromatography»).

Т а б л и ц а А2.5 — Суммарное содержание олефинов

Количество образцов	Суммарное содержание олефинов, % масс.	
	Многомерный метод (ПИОНА)	Настоящий стандарт
2	7,1	4,4
6	9,8	9,4
8	6,6	6,2
10	15,1	13,7
13	11,1	11,1
14	24,6	22,2
Среднее	12,4	11,2

Т а б л и ц а А2.6 — Суммарное содержание оксигенатов

Количество образцов	Суммарное содержание оксигенатов, % масс.	
	ПИОНА ^{А)}	Процедура ^{В)}
2 ^{В)}	15,3	16,1
6 ^{В)}	7,0	8,1
8 ^{В)}	4,2	4,5
10 ^{С)}	> 8	10,0
13 ^{В)}	20,5	19,9
14 ^{В)}	2,8	3,2
Среднее	N/A	10,3

^{А)} Многомерный метод (ПИОНА).
^{В)} Преимущественно оксигенаты — МТБЭ.
^{С)} Преимущественно оксигенаты — этанол.

Т а б л и ц а А2.7 — Суммарное содержание парафинов и нафтенов

В процентах по массе

Количество образцов	Суммарное содержание парафинов		Суммарное содержание нафтенов	
	ПИОНА ^{А)}	Настоящий стандарт	ПИОНА ^{А)}	Настоящий стандарт
8	35,6	35,0	2,2	2,8
10	41,1	42,3	5,6	6,7
13	42,6	43,0	1,3	3,5
14	34,1	37,9	5,9	7,6
Среднее	38,4	39,6	3,8	5,2

^{А)} Многомерный метод (ПИОНА).

Т а б л и ц а А2.8 — Исследование линейности отклика оксигенатов в методе IHA — лаборатория 1

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
Метанол (МЕОН)	1,01	5,05	10,02	20,01	29,83		
Среднее	37792	201545	406795	816960	1208524		
	38002	200204	409233	820596	1225686		
	37897	20087,5	408014	818778	1217105		
Коэффициент отклика	$2,67 \cdot 10^{-5}$	$2,51 \cdot 10^{-5}$	$2,46 \cdot 10^{-5}$	$2,44 \cdot 10^{-5}$	$2,45 \cdot 10^{-5}$	$2,51 \cdot 10^{-5}$	2,920678

Продолжение таблицы А2.8

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
Этанол (ЕТОН)	1	5	10,1	20,15	30,18		
Среднее	56107	288820	604107	1214248	1807248		
	52935	285869	597366	1223531	1830666		
	54521	287344,5	600736,5	1218890	1818957		
Коэффициент отклика	$1,83 \cdot 10^{-5}$	$1,74 \cdot 10^{-5}$	$1,68 \cdot 10^{-5}$	$1,65 \cdot 10^{-5}$	$1,66 \cdot 10^{-5}$	$1,71 \cdot 10^{-5}$	1,997164
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТВА	0,964	4,9592	9,9583	19,8768	29,7953		
Среднее	89751	443262	899170	1830312	2742339		
	92269	441843	893544	1820174	2765568		
	91010	442552,5	896357	1825243	2753954		
Коэффициент отклика	$1,06 \cdot 10^{-5}$	$1,12 \cdot 10^{-5}$	$1,11 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$	$1,08 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$	1,273649
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МТБЭ	0,9992	50362	9,9724	20,0248	30,0471		
Среднее	76166	391956	765248	1537935	2332931		
	77640	399654	761273	1535598	2332734		
	76903	395805	763260,5	1536767	2332833		
Коэффициент отклика	$1,3 \cdot 10^{-5}$	$1,27 \cdot 10^{-5}$	$1,31 \cdot 10^{-5}$	$1,3 \cdot 10^{-5}$	$1,29 \cdot 10^{-5}$	$1,29 \cdot 10^{-5}$	1,507996
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЭТБЭ	0,9851	4,9255	9,8707	19,6724	29,5727		
Среднее	86770	420851	852468	1689595	2515456		
	85993	420221	867050	1690395	2506966		
	86381,5	420536	859759	1689995	2511211		
Коэффициент отклика	$1,14 \cdot 10^{-5}$	$1,17 \cdot 10^{-5}$	$1,15 \cdot 10^{-5}$	$1,16 \cdot 10^{-5}$	$1,18 \cdot 10^{-5}$	$1,16 \cdot 10^{-5}$	1,352309
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТАМЭ	0,9997	4,9788	9,8883	19,153	29,7144		
Среднее	90368	443934	876234	1740744	2576420		
	89502	444981	874999	1762466	2584069		
	89435	444457,5	875616,5	1751605	2580245		
Коэффициент отклика	$1,12 \cdot 10^{-5}$	$1,12 \cdot 10^{-5}$	$1,13 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$	$1,15 \cdot 10^{-5}$	$1,12 \cdot 10^{-5}$	1,308241

Окончание таблицы А2.8

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
№7	8,475	8,44	8,4525	8,4525	8,695		
Среднее	994302	951137	991971	982424	1006023		
	997469	983612	990664	1002009	1006083		
	995885,5	967404,5	991317,5	992216,5	1006053		
Коэффициент отклика	$8,51 \cdot 10^{-6}$	$8,72 \cdot 10^{-6}$	$8,53 \cdot 10^{-6}$	$8,52 \cdot 10^{-6}$	$8,64 \cdot 10^{-6}$	$8,58 \cdot 10^{-6}$	1

Т а б л и ц а А2.9 — Исследование линейности отклика оксигенатов в методе IHA — лаборатория 2

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МЕОН	1,01	5,05	10,02	20,01	29,83		
Среднее	44097	236256	478801	955095	1454605		
	44051	237455	480020	992190	1465533		
	44074	236855,5	479410,5	988642,5	1460069		
Коэффициент отклика	$2,29 \cdot 10^{-5}$	$2,13 \cdot 10^{-5}$	$2,09 \cdot 10^{-5}$	$2,02 \cdot 10^{-5}$	$2,04 \cdot 10^{-5}$	$2,12 \cdot 10^{-5}$	2,956773
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЕТОН	1	5	10,1	20,15	30,18		
Среднее	63749	332568	698238	1430974	2178293		
	62784	332799	701430	1431363	2204197		
	63266,5	332683,5	699834	1431169	2191245		
Коэффициент отклика	$1,58 \cdot 10^{-5}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$1,44 \cdot 10^{-5}$	$1,41 \cdot 10^{-5}$	$1,38 \cdot 10^{-5}$	$1,46 \cdot 10^{-5}$	2,04331
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТВА	0,964	4,9692	9,9583	19,8768	29,7953		
Среднее	108001	526541	1055347	2147710	3316200		
	110407	524386	1061356	2163089	3322481		
	109204	525463,5	1058352	2155400	3319341		
Коэффициент отклика	$8,83 \cdot 10^{-6}$	$9,46 \cdot 10^{-6}$	$9,41 \cdot 10^{-6}$	$9,22 \cdot 10^{-6}$	$8,98 \cdot 10^{-6}$	$9,18 \cdot 10^{-6}$	1,282428

Окончание таблицы А2.9

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МТБЭ	0,9992	5,0362	9,9724	20,0248	30,0471		
Среднее	90887	473216	910349	1794640	2777855		
	91715	476896	904173	1794196	2780266		
	91301	475056	907261	1794418	2779061		
Коэффициент отклика	$1,09 \cdot 10^{-5}$	$1,06 \cdot 10^{-5}$	$1,1 \cdot 10^{-5}$	$1,12 \cdot 10^{-5}$	$1,08 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$	1,523223
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЭТБЭ	0,9851	4,9255	9,8707	19,6724	29,5727		
Среднее	103792	516002	1020170	2007710	2980345		
	104863	518258	1035091	2007448	2983391		
	104327,5	517130	1027631	2007579	2981868		
Коэффициент отклика	$9,44 \cdot 10^{-6}$	$9,52 \cdot 10^{-6}$	$9,61 \cdot 10^{-6}$	$9,8 \cdot 10^{-6}$	$9,92 \cdot 10^{-6}$	$9,96 \cdot 10^{-6}$	1,349418
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТАМЭ	0,9997	4,9788	9,8833	19,153	29,7144		
Среднее	103829	523120	1050222	2077446	3083066		
	104085	517930	1057409	2115710	3084788		
	103957	520525	1053816	2096578	3083927		
Коэффициент отклика	$9,62 \cdot 10^{-6}$	$9,56 \cdot 10^{-6}$	$9,38 \cdot 10^{-6}$	$9,14 \cdot 10^{-6}$	$9,64 \cdot 10^{-6}$	$9,47 \cdot 10^{-6}$	1,322771
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
№7	8,475	8,44	8,4525	8,4525	8,695		
Среднее	1198960	1190806	1178498	1177607	1195493		
	1198844	1190899	1178015	1176611	1212514		
	1198902	1190853	1178257	1177109	1203804		
Коэффициент отклика	$7,07 \cdot 10^{-6}$	$7,09 \cdot 10^{-6}$	$7,17 \cdot 10^{-6}$	$7,18 \cdot 10^{-6}$	$7,22 \cdot 10^{-6}$	$7,15 \cdot 10^{-6}$	1

Т а б л и ц а А2.10 — Исследование линейности отклика оксигенатов в методе IHA — лаборатория 3

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МЕОН	1,01	5,05	10,02	20,01	29,83		
Среднее	151533	864732	1741799	3589766	5293556		
	164863	854798	1759435	3746174	5368227		
	158198	859765	1750617	3667970	5330892		
Коэффициент отклика	$6,38 \cdot 10^{-6}$	$5,87 \cdot 10^{-6}$	$5,72 \cdot 10^{-6}$	$5,46 \cdot 10^{-6}$	$5,6 \cdot 10^{-6}$	$5,81 \cdot 10^{-6}$	2,903282
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЕТОН	1	5	10,1	20,15	30,18		
Среднее	245820	1078429	2521533	5099484	7899031		
	257618	1197628	2511218	5200823	8259533		
	251719	1138029	2516376	5150154	8079282		
Коэффициент отклика	$3,97 \cdot 10^{-6}$	$4,39 \cdot 10^{-6}$	$4,01 \cdot 10^{-6}$	$3,91 \cdot 10^{-6}$	$3,74 \cdot 10^{-6}$	$4,01 \cdot 10^{-6}$	2,002794
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТВА	0,964	4,9692	9,9583	19,8768	29,7953		
Среднее	399808	1793750	3184446	7393280	11429736		
	409171	1908282	3579163	7370104	11664000		
	404489,5	1851016	3381805	7381692	11546868		
Коэффициент отклика	$2,38 \cdot 10^{-6}$	$2,68 \cdot 10^{-6}$	$2,94 \cdot 10^{-6}$	$2,69 \cdot 10^{-6}$	$2,58 \cdot 10^{-6}$	$2,66 \cdot 10^{-6}$	1,32856
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МТБЭ	0,9992	5,0362	9,9724	20,0248	30,0471		
Среднее	353648	1719976	3016380	5400167	9756443		
	365624	1734192	3207775	6049396	9486117		
	359636	1727084	3112078	5724782	9621280		
Коэффициент отклика	$2,78 \cdot 10^{-6}$	$2,92 \cdot 10^{-6}$	$3,2 \cdot 10^{-6}$	$3,5 \cdot 10^{-6}$	$3,12 \cdot 10^{-6}$	$3,1 \cdot 10^{-6}$	1,55197
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЭТБЭ	0,9851	4,9255	9,8707	19,6724	29,5727		
Среднее	368857	1916504	3651460	6368342	8631784		
	370528	1990928	3698002	6858897	9781590		
	369692,5	1953716	3674731	6612620	9206687		
Коэффициент отклика	$2,66 \cdot 10^{-6}$	$2,52 \cdot 10^{-6}$	$2,69 \cdot 10^{-6}$	$2,97 \cdot 10^{-6}$	$3,21 \cdot 10^{-6}$	$2,81 \cdot 10^{-6}$	1,405891

Окончание таблицы А2.10

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТАМЭ	0,9997	4,9788	9,8883	19,153	29,7144		
Среднее	373564	1867693	3846963	7398715	9605677		
	364642	1876735	4016568	7511412	10394700		
	369103	1872214	3931766	7455064	10000189		
Коэффициент отклика	$2,71 \cdot 10^{-6}$	$2,66 \cdot 10^{-6}$	$2,51 \cdot 10^{-6}$	$2,57 \cdot 10^{-6}$	$2,97 \cdot 10^{-6}$	$2,68 \cdot 10^{-6}$	1,342326
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
№7	8,475	8,44	8,4525	8,4525	8,695		
Среднее	$3 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^6$	312404	$4 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^6$		
	$4 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^6$	4106	$5 \cdot 10^6$	$4 \cdot 10^6$		
	3691763	4064455	2253742	4516374	4371883		
Коэффициент отклика	$2,3 \cdot 10^{-6}$	$2,08 \cdot 10^{-6}$	$3,75 \cdot 10^{-6}$	$1,87 \cdot 10^{-6}$	$1,99 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	1

Т а б л и ц а А2.11 — Исследование линейности отклика оксигенатов в методе IHA — лаборатория 4

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МЕОН	1,01	5,05	10,02	20,01	29,83		
Среднее	658639	3389850	6670376	13542502	18749414		
	601443	3019715	6368637	13051539	17165160		
	630041	3204783	6519507	13297021	17957287		
Коэффициент отклика	$1,6 \cdot 10^{-6}$	$1,58 \cdot 10^{-6}$	$1,54 \cdot 10^{-6}$	$1,5 \cdot 10^{-6}$	$1,66 \cdot 10^{-6}$	$1,58 \cdot 10^{-6}$	2,794957
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЕТОН	1	5	10,1	20,15	30,18		
Среднее	826854	4450557	9154374	18060524	28066595		
	734856	4082467	8580584	17505672	28072314		
	780855	4266512	8867479	17783098	28069455		
Коэффициент отклика	$1,28 \cdot 10^{-6}$	$1,17 \cdot 10^{-6}$	$1,14 \cdot 10^{-6}$	$1,13 \cdot 10^{-6}$	$1,08 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-6}$	2,056683

Окончание таблицы А2.11

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТВА	0,964	4,9692	9,9583	19,8768	29,7953		
Среднее	1578407	4266396	14460028	29135138	43225116		
	1435170	63376881	13565231	27794630	42612348		
	1506789	5302139	14012645	28464884	42918732		
Коэффициент отклика	$6,4 \cdot 10^{-7}$	$9,37 \cdot 10^{-7}$	$7,11 \cdot 10^{-7}$	$6,98 \cdot 10^{-7}$	$6,94 \cdot 10^{-7}$	$7,36 \cdot 10^{-7}$	1,305022
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МТБЭ	0,9992	5,0362	9,9724	20,0248	30,0471		
Среднее	1252485	5941164	10848222	17786018	23089928		
	1255790	6142349	10162313	17011562	22404206		
	1254138	6041757	10505268	17398790	22747067		
Коэффициент отклика	$7,97 \cdot 10^{-7}$	$8,34 \cdot 10^{-7}$	$9,49 \cdot 10^{-7}$	$1,15 \cdot 10^{-6}$	$1,32 \cdot 10^{-6}$	$1,01 \cdot 10^{-6}$	1,791283
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЭТБЭ	0,9851	4,9265	9,9807	19,6724	29,5727		
Среднее	1310455	6926229	12417871	20398546	27031106		
	1306372	7052557	12595757	19329114	26122426		
	1308414	6989393	12506814	19863830	26576766		
Коэффициент отклика	$7,53 \cdot 10^{-7}$	$7,05 \cdot 10^{-7}$	$7,89 \cdot 10^{-7}$	$9,9 \cdot 10^{-7}$	$1,11 \cdot 10^{-6}$	$8,7 \cdot 10^{-7}$	1,542526
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТАМЭ	0,9997	4,9788	9,8883	19,153	29,7144		
Среднее	1400316	6820054	13673677	22152636	28646506		
	1357511	6857019	13936737	22286660	27439076		
	1378914	6838537	13805207	22219648	28042791		
Коэффициент отклика	$7,25 \cdot 10^{-7}$	$7,28 \cdot 10^{-7}$	$7,16 \cdot 10^{-7}$	$8,62 \cdot 10^{-7}$	$1,06 \cdot 10^{-6}$	$8,18 \cdot 10^{-7}$	1,450677
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
№с7	8,475	8,44	8,4525	8,4525	8,695		
Среднее	15260819	15252480	14899327	15397626	14345822		
	14816484	14876828	14956987	15670374	15233576		
	15038652	15064654	14928157	15534000	14789699		
Коэффициент отклика	$5,64 \cdot 10^{-7}$	$5,6 \cdot 10^{-7}$	$5,66 \cdot 10^{-7}$	$5,44 \cdot 10^{-7}$	$5,88 \cdot 10^{-7}$	$5,64 \cdot 10^{-7}$	1

Т а б л и ц а А2.12 — Исследование линейности отклика оксигенатов в методе IHA — лаборатория 5

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МЕОН	1,01	5,05	10,02	20,01	29,83		
Среднее	130,85	729,625	1474,483	3103,843	4600,484		
Коэффициент отклика	0,007719	0,006921	0,006796	0,006447	0,006484	0,006873	3,08498
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЕТОН	1	5	10,1	20,15	30,18		
Среднее	195,402	1054,59	2115,254	4301,374	6707,759		
Коэффициент отклика	0,005118	0,004741	0,004775	0,004685	0,004499	0,004763	2,138015
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТВА	0,964	4,9692	9,9583	19,8768	29,7953		
Среднее	347,107	1725,706	3442,236	6695,103	10183,1		
Коэффициент отклика	0,002777	0,00288	0,002893	0,002969	0,002926	0,002889	1,296638
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МТБЭ	0,9992	5,0362	9,9724	20,0248	30,0471		
Среднее	290,368	1518,529	3008,79	6043,303	8800,898		
Коэффициент отклика	0,003441	0,003316	0,003314	0,003314	0,003414	0,00336	1,508054
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЭТБЭ	0,9851	4,9255	9,8707	19,6724	29,5727		
Среднее	308,613	1630,908	3253,559	6580,098	9806,89		
Коэффициент отклика	0,003192	0,00302	0,003034	0,00299	0,003016	0,00305	1,369041
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТАМЭ	0,9997	4,9788	9,8883	19,153	29,7144		
Среднее	322,928	1631,466	3351,751	6693,316	10161,7		
Коэффициент отклика	0,003096	0,003052	0,00295	0,002862	0,002924	0,002977	1,336026

Окончание таблицы А2.12

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
№7	8,475	8,44	8,4525	8,4525	8,695		
Среднее	3915,73	3733,39	3714,828	3835,85	3889,013		1
Коэффициент отклика	0,002164	0,002261	0,002275	0,002204	0,002236	0,002228	
Примечание — Среднюю площадь пика определяют по среднему значению двух анализов.							

Таблица А2.13 — Исследование линейности отклика оксигенатов в методе IHA — лаборатория 6

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МЕОН	1,01	5,05	10,02	20,01	29,83		
Среднее	128,825	795,291	1607,186	3383,189	5800,591		
Коэффициент отклика	0,00784	0,00635	0,006234	0,005915	0,005143	0,006296	3,390586
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЕТОН	1	5	10,1	20,15	30,18		
Среднее	212,988	1149,503	2305,626	4688,498	7300,836		
Коэффициент отклика	0,004695	0,00435	0,004381	0,004298	0,004134	0,004371	2,354003
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТВА	0,964	4,9692	9,9583	19,8768	29,7953		
Среднее	378,347	1881,019	3752,037	7297,662	11045,72		
Коэффициент отклика	0,002548	0,002642	0,002654	0,002724	0,002697	0,002653	1,428645
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МТВЭ	0,9992	5,0362	9,9724	20,0248	30,0471		
Среднее	316,501	1655,196	3279,581	6587,2	9660,288		
Коэффициент отклика	0,003157	0,003043	0,003041	0,00304	0,00311	0,003078	1,657594

Окончание таблицы А2.13

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЭТБЭ	0,9851	4,9255	9,8707	19,6724	29,5727		
Среднее	336,388	1777,69	3546,379	7172,307	10609,51		
Коэффициент отклика	0,002928	0,002771	0,002783	0,002743	0,002787	0,002803	1,509178
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТАМЭ	0,9997	4,9788	9,8883	19,153	29,7144		
Среднее	351,991	1778,298	3653,409	7295,715	11076,25		
Коэффициент отклика	0,00284	0,0028	0,002707	0,002625	0,002683	0,002731	1,47059
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
№7	8,475	8,44	8,4525	8,4525	8,695		
Среднее	4698,033	4477,402	4454,942	4601,379	4665,706		
Коэффициент отклика	0,001804	0,001885	0,001897	0,001837	0,001864	0,001857	1
Примечание — Среднюю площадь пика определяют по среднему значению двух анализов.							

Таблица А2.14 — Исследование линейности отклика оксигенатов в методе IHA — лаборатория 7

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МЕОН	1,01	5,05	10,02	20,01	29,83		
Среднее	35419	207968	408281	807253	1208115		
	36040	195967	408281	874729	1301947		
	35729,5	201967,5	408281	840991	1255031		
Коэффициент отклика	$2,83 \cdot 10^{-5}$	$2,5 \cdot 10^{-5}$	$2,45 \cdot 10^{-5}$	$2,38 \cdot 10^{-5}$	$2,38 \cdot 10^{-5}$	$2,51 \cdot 10^{-5}$	2,922508
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЕОН	1	5	10,1	20,15	30,18		
Среднее	45510	292874	642031	1234541	1824287		
	50885	281463	594198	1259869	2005196		
	48197,5	287168,5	618114,5	1247205	1914742		
Коэффициент отклика	$2,07 \cdot 10^{-5}$	$1,74 \cdot 10^{-5}$	$1,63 \cdot 10^{-5}$	$1,62 \cdot 10^{-5}$	$1,58 \cdot 10^{-5}$	$1,73 \cdot 10^{-5}$	2,014392

Окончание таблицы А2.14

Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТВА	0,964	4,9692	9,9583	19,8768	29,7953		
Среднее	93315	475528	979360	2031219	2865032		
	102421	476914	888766	1840517	2928378		
	97868	476221	934063	1935868	2896705		
Коэффициент отклика	$9,85 \cdot 10^{-5}$	$1,04 \cdot 10^{-5}$	$1,07 \cdot 10^{-5}$	$1,03 \cdot 10^{-5}$	$1,03 \cdot 10^{-5}$	$1,03 \cdot 10^{-5}$	1,200454
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
МТБЭ	0,9992	5,0362	9,9724	20,0248	30,0471		
Среднее	75952	405208	705631	1548681	2380261		
	77415	417553	757750	1580147	2408423		
	76883,5	411380,5	731690,5	1564414	2394342		
Коэффициент отклика	$1,3 \cdot 10^{-5}$	$1,22 \cdot 10^{-5}$	$1,36 \cdot 10^{-5}$	$1,28 \cdot 10^{-5}$	$1,25 \cdot 10^{-5}$	$1,29 \cdot 10^{-5}$	1,497693
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ЭТБЭ	0,9851	4,9255	8,9707	19,6724	29,5727		
Среднее	83107	436772	890514	1713524	2609194		
	85993	442601	917344	1720724	2604325		
	84550	439686,5	903929	1717124	2606760		
Коэффициент отклика	$1,17 \cdot 10^{-5}$	$1,12 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$	$1,15 \cdot 10^{-5}$	$1,13 \cdot 10^{-5}$	$1,13 \cdot 10^{-5}$	1,31875
Образец, % масс.						Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
ТАМЭ	0,9997	4,9788	9,8883	19,153	29,7144		
Среднее	89539	455171	900734	1836776	2713677		
	90145	461944	915196	1883508	2658665		
	89842	458557,5	907965	1860142	2686171		
Коэффициент отклика	$1,11 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-5}$	$1,03 \cdot 10^{-5}$	$1,11 \cdot 10^{-5}$	$1,08 \cdot 10^{-5}$	1,264195
Образец, масс. %	20 %	5 %	1 %	1 %	30 %	Средний коэффициент отклика	Относительный коэффициент отклика
№7	8,475	8,44	8,4525	8,4525	8,695		
Среднее	1034198	1392371	989383	983168	1077830		
	889948	935398	1051329	1067382	1010624		
	962073	1163885	1020356	1025275	1044227		
Коэффициент отклика	$8,81 \cdot 10^{-5}$	$7,25 \cdot 10^{-5}$	$8,28 \cdot 10^{-5}$	$8,24 \cdot 10^{-5}$	$8,33 \cdot 10^{-5}$	$8,18 \cdot 10^{-5}$	1

A2.2 Таблицы A2.2 — A2.7 представляют сравнение данного метода с другими методами для отдельных групп соединений. Многомерный метод анализа (PIONA) используют, т. к. с его помощью можно получить удовлетворительные результаты по группам: общие олефины, общие парафины и общие нафты. Результаты определения бензола и толуола с использованием указанных методов находятся в пределах значений воспроизводимости методов. Количество образцов соответствует тому же количеству, которое использовалось в МСИ. Необходимо отметить, что для МСИ использовались образцы топлив для двигателей с искровым зажиганием. При смешении компонентов могут быть получены другие результаты.

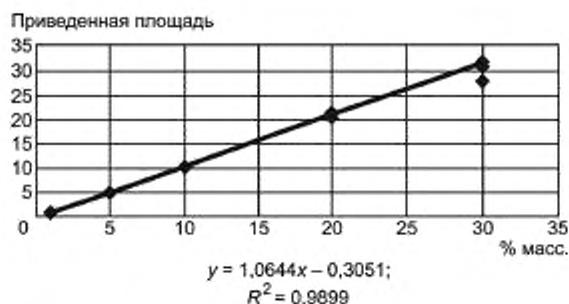


Рисунок A2.1 — Определение расчетного отклика при анализе метанола методом ИНА

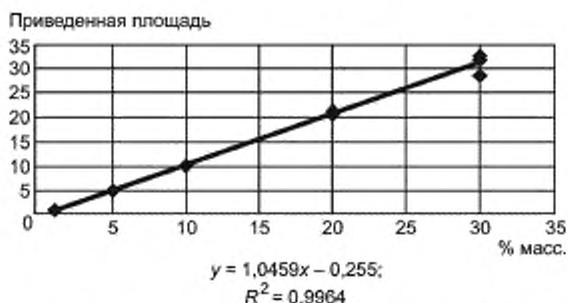


Рисунок A2.2 — Определение расчетного отклика при анализе этанола методом ИНА

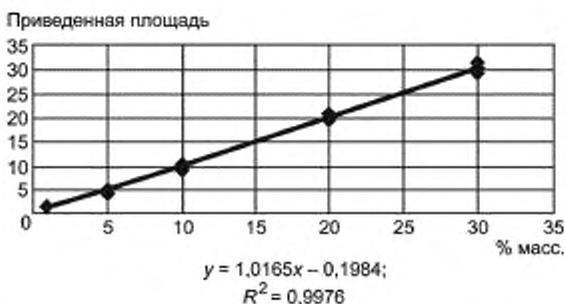


Рисунок A2.3 — Определение расчетного отклика при анализе трет-бутанола методом ИНА

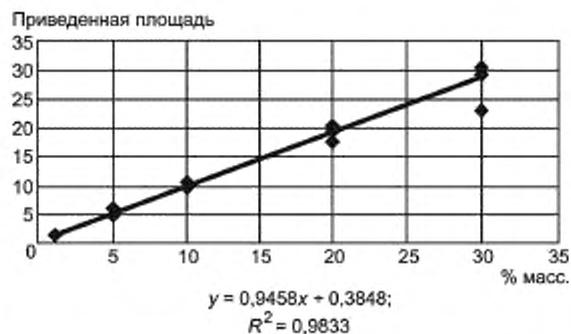


Рисунок А2.4 — Определение расчетного отклика при анализе МТБЭ методом ИНА

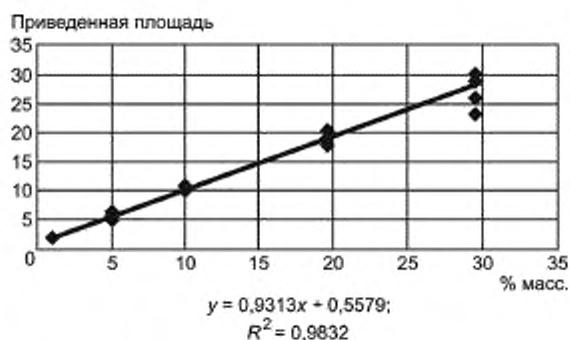


Рисунок А2.5 — Определение расчетного отклика при анализе ЭТБЭ методом ИНА

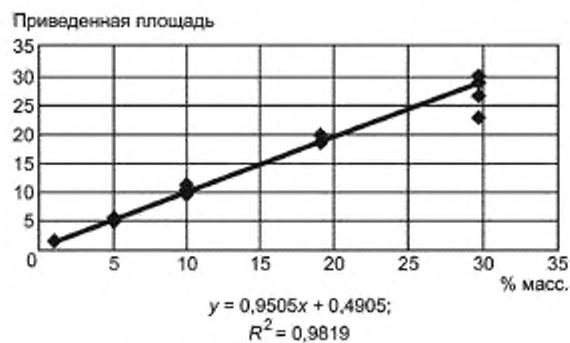


Рисунок А2.6 — Определение расчетного отклика при анализе ТАМЭ методом ИНА

Приложения X
(справочные)

X1 Список используемой литературы

X1.1 Следующие публикации по детальному углеводородному анализу (DHA) можно использовать как основу для пользователей настоящего метода:

X1.1.1 Johannsen N.G., Eltre L.S. Индексы удерживания углеводородов на полых капиллярных колонках с метилсиликоновой жидкой фазой. *Chromatographia*, vol. 5, № 10, Oct, 1982.

X1.1.2 Johannsen N.G., Eltre L.S., Miller R.L. Количественный анализ углеводородов по структурным группам в бензинах и дистиллятах. Часть 1. *Journal of Chromatography*, 256, 1983, pp. 393—417.

X1.1.3 Kopp V.R., Bones C.J., Doerr D.G., Ho A.J., Schubert A.J. Тяжелые углеводороды. Изучение летучести: смешение топлив и анализ для автомобильной промышленности. Исследовательская программа по нефтяным выбросам в атмосферу. SAE paper No. 930143, March 1993.

X1.1.4 Schubert A.J., Johannsen N. G. Межлабораторное исследование по разработке стандартного метода для спецификации бензинов газовой хроматографией. SAE paper No. 930144, March 1993.

X1.1.5 Di Sanzo F.P., Giagrosso V.G. Анализ образцов жидких углеводородов и бензинов под давлением методами газовой хроматографии на капиллярной колонке и PIONA-анализаторе. *Journal of Chromatographic science*, vol 26, June 1988, pp. 258—266.

X1.1.6 Durand J.P., Beboluene J.J., Ducrozet A. Подробные характеристики нефтепродуктов с использованием капиллярной газовой хроматографии. *Analysis*, 23, 1995, pp. 481—483.

X1.1.7 CAN/CGSB-3.0, No 14.3-94. Метод определения индивидуального компонентного состава (IHA) для топлив с принудительным воспламенением газовой хроматографией, общий сборник канадских стандартов.

X1.1.8 Французский стандарт NF N07-086, декабрь 1995. Определение группового углеводородного состава моторных бензинов детальным анализом на газовом хроматографе с капиллярной колонкой.

X2 Данные для углеводородов при использовании водорода в качестве газа-носителя

X2.1 В настоящем приложении приведена характеристика модификации метода испытания, которая уменьшает общее время анализа со 150 до 82 мин. Основное изменение заключается в использовании водорода вместо гелия в качестве газа-носителя. Изменены также скорость нагрева термостата и расход газа через колонку для получения оптимального разрешения и линейной скорости. Все остальные параметры сохранены как в основном методе. Включены испытания для определения разрешения колонки / разрешения метода. Приложение включает хроматограмму с идентификацией компонентов, а также список компонентов, определяемых в заданных условиях (таблица X2.1).

Т а б л и ц а X2.1 — Параметры хроматографирования

Условия хроматографирования	Требования	Условия хроматографирования	Требования
Газ-носитель	Водород	конечная температура, °C	130
Установки инжектора:		время выдержки, мин	0
температура инжектора, °C	270	скорость третьей стадии, °C/мин	6,28
соотношение деления потоков	200:1	конечная температура, °C ^{с)}	270
вкладыш	Деактивированное стекло	время выдержки, мин	0
вводимый объем, мкл	0,2	Требования к колонке:	
Установки детектора:		длина, м	100
температура детектора, °C ^{а)}	300	внутренний диаметр, мм	0,25
расходы газов:		жидкая фаза	100%-ный полидиметил-силоксан
водород, мл/мин ^{б)}	40	толщина неподвижной фазы, мкм	0,5
воздух, мл/мин	450	давление (постоянное), psi	31,0
вспомогательный азот, мл/мин ^{б)}	20	поток, мл/мин (диапазон)	3,3 — 1,0
Установки термостата колонки:		линейная скорость газа, см/с (диапазон)	46 — 29
начальная температура, °C	0	Частота обработки, Гц	20
начальное время, мин	9,5	Полное время анализа, мин (включая время продувки)	90,6
скорость первой стадии, °C/мин	1,5		
конечная температура, °C	50		
время выдержки, мин	0		
скорость второй стадии, °C/мин	3,14		

а) Устанавливается на 20 °C — 25 °C выше наибольшей температуры колонки.
 б) Значение устанавливается по рекомендациям производителя.
 с) Для обеспечения полного элюирования компонентов образца можно установить конечное время удерживания или температуру.


X2.2 В таблице X2.1 заданы рабочие условия хроматографирования, требования к колонке и системе обработки данных. В данных условиях элюируются все компоненты, включая пентадекан (*n*-C₁₅).

X2.3 В таблице X2.2 приведены требования по разрешению колонки.

Т а б л и ц а X2.2 — Требования к характеристикам разрешения колонки


Пара компонентов	Минимальное разрешение	Концентрация каждого из компонентов, %
74 2,3-Диметилбутан	1,0	0,99
78 Метил-трет-бутиловый эфир		1,23
156 Бензол	1,0	0,83
158 1-Метилциклопентен		0,49
304 Тoluол	0,4	7,65
306 2,3,3-Триметилпентан		0,65
474 Метаксилол	0,4	3,95
476 Параксилол		1,58
876 <i>n</i> -Тридекан	1,0	0,01
878 1-Метилнафталин		0,02

X2.4 На рисунках X2.1 — X2.5 приведены примеры хроматограмм для критических случаев, приведенных в таблице X2.2.

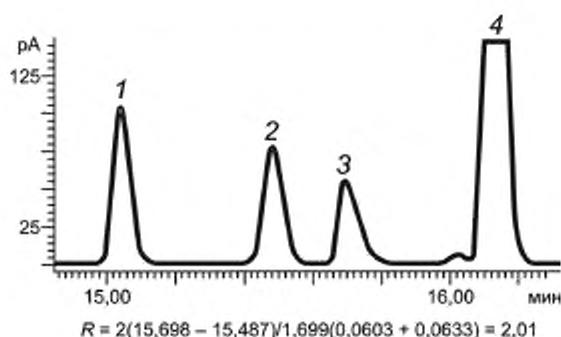


1 — циклопентан (пик номер 72); 2 — 2,3-диметилбутан (пик номер 74); 3 — МТБЭ (пик номер 78);
4 — 2-метилпентан (пик номер 82)

Рисунок X2.1 — 2,3-Диметилбутан и метил-трет-бутиловый эфир

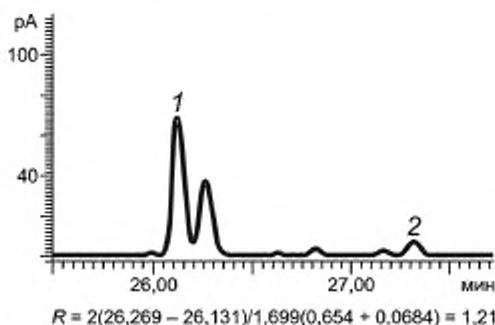


1 — бензол (пик номер 156); 2 — циклогексан (пик номер 166)

Рисунок X2.2 — Бензол и 1-метилциклопентен

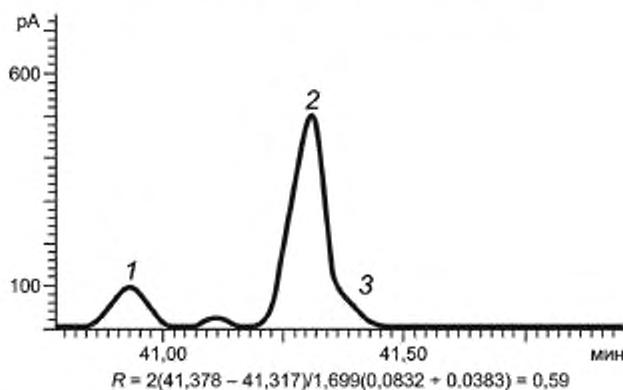


1 — 2,3,4-триметилпентан (пик номер 300); 2 — толуол (пик номер 304); 3 — 2,3,3-триметилпентан (пик номер 306)

Рисунок X2.3 — Тoluол и 2,3,3-триметилпентан

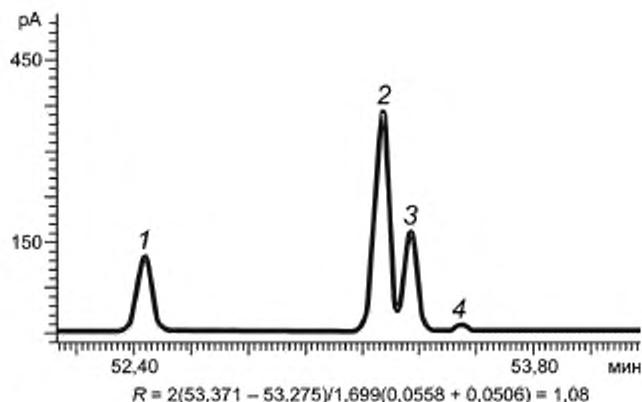

1 — этилбензол (пик номер 460); 2 — метаксилол (пик номер 474); 3 — параксилол (пик номер 476).
4 — 2,3-диметилпентан (пик номер 478)

Рисунок X2.4 — Метаксилол и параксилол

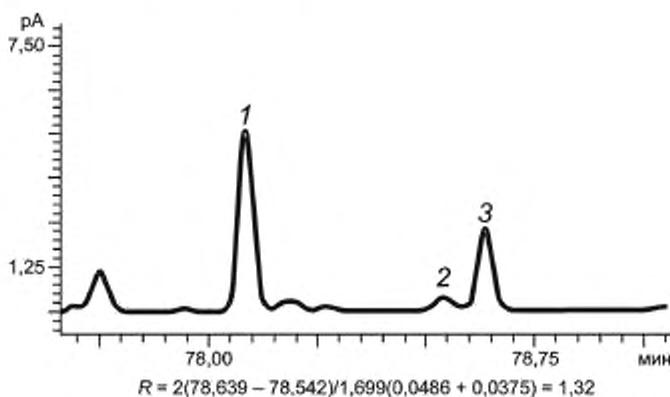

1 — 2-метилнафталин (пик номер 870); 2 — *n*-тридекан (пик номер 876); 3 — 1-метилнафталин (пик номер 878)

Рисунок X2.5 — Тридекан и 1-метилнафталин

X2.5 Таблица X2.3 представляет результаты эффективности колонки при изотермическом анализе *n*-пентана при температуре 35 °С.

Т а б л и ц а X2.3 — Эффективность колонки

Компонент	Время удержания (RT), мин	Ширина пика на полувысоте	Теоретические тарелки
38 <i>n</i> -Пентан	5,406	0,0178	511462

X2.6 На рисунках X2.6 — X2.11 представлена подробная идентифицированная хроматограмма стандартного бензина CGSB0496, полученная в условиях, задаваемых в таблице X2.1.

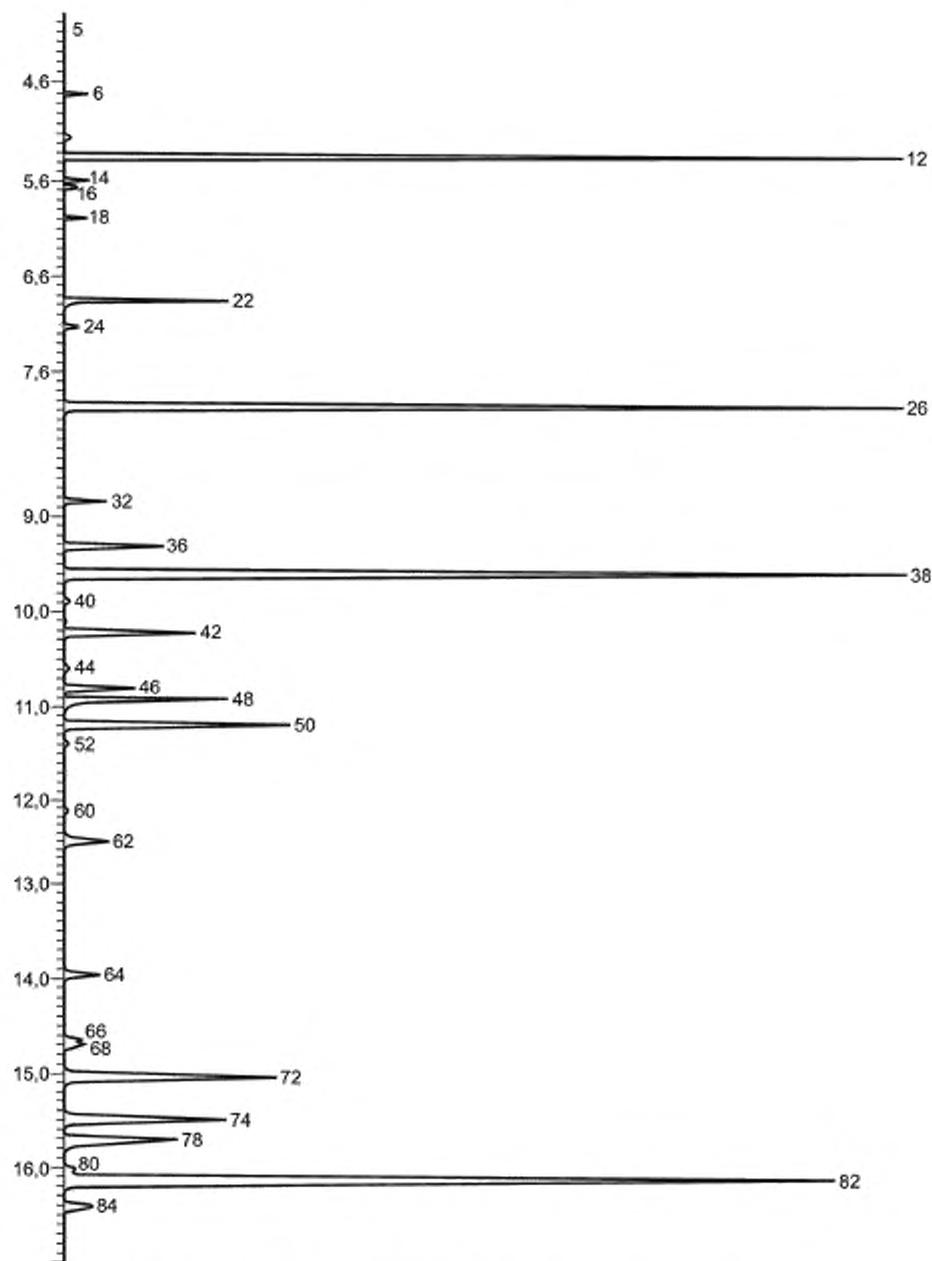


Рисунок X2.6 — Детальная хроматограмма стандартного образца бензина CGSB0496 (0 — 17 мин)

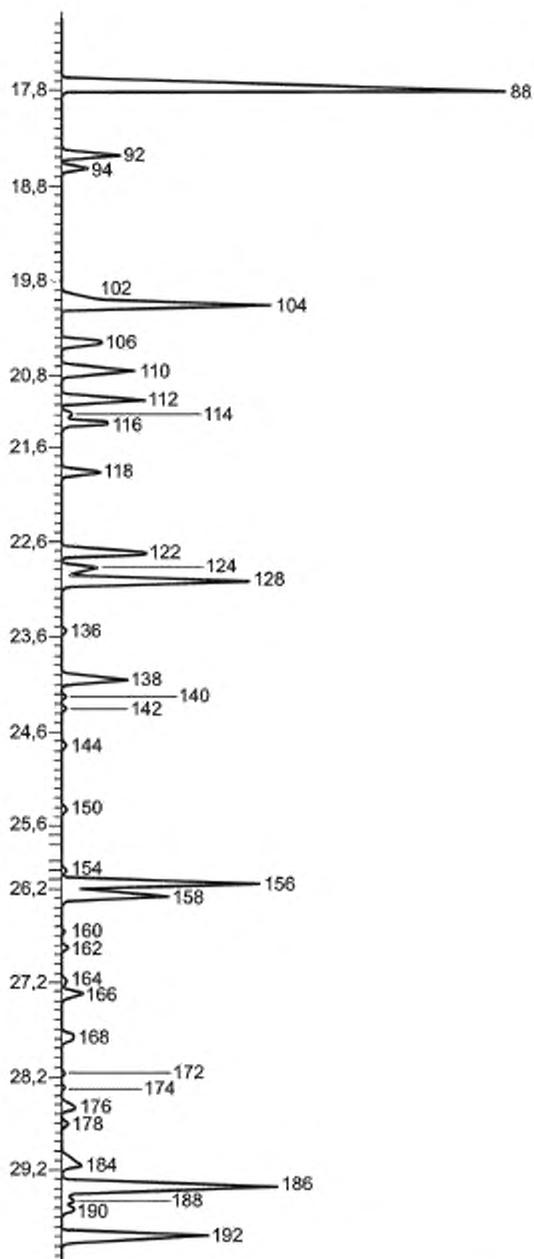


Рисунок X2.7 — Детальная хроматограмма стандартного образца бензина CGSB0496 (17 — 30,5 мин)

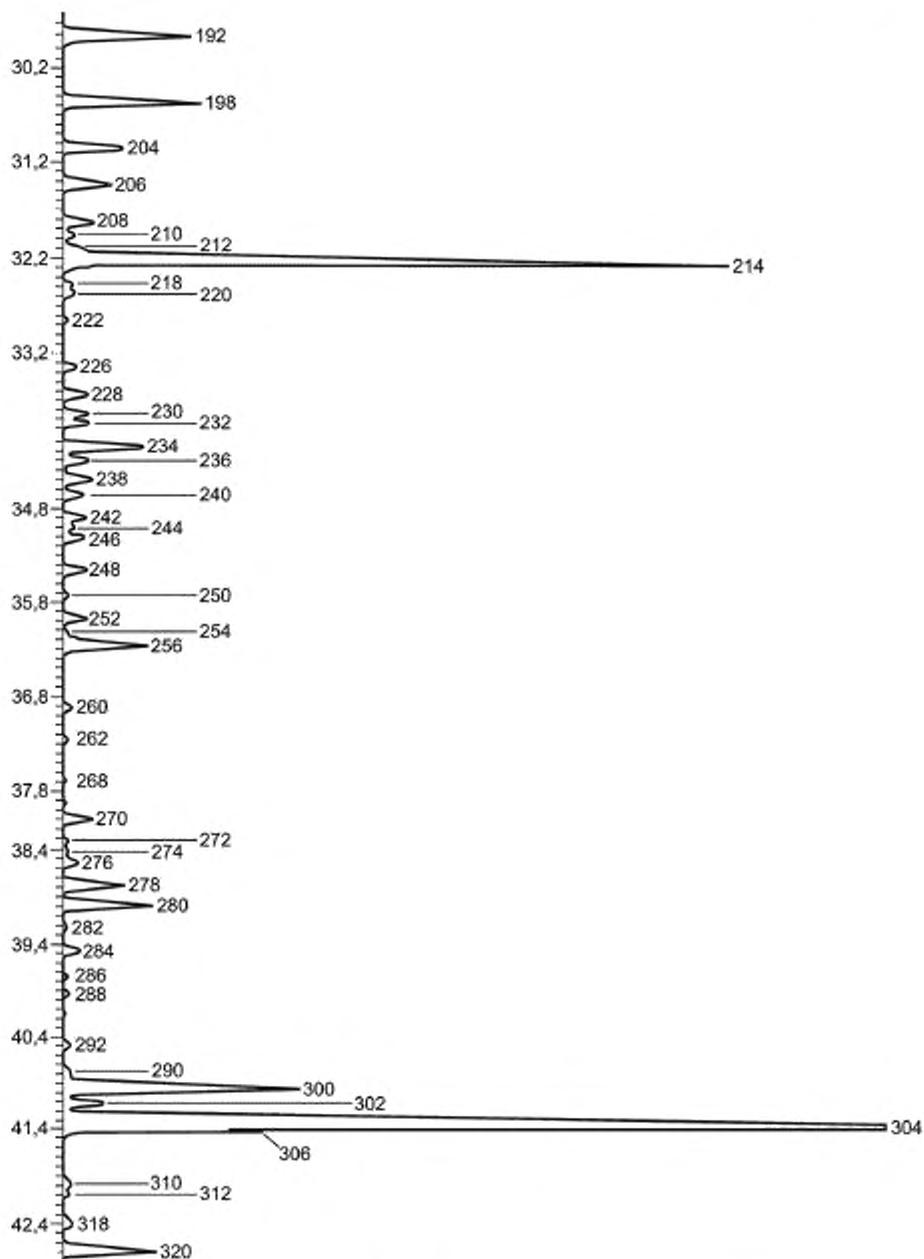


Рисунок X2.8 — Детальная хроматограмма стандартного образца бензина CGSB0496 (30,5 — 42,5 мин)

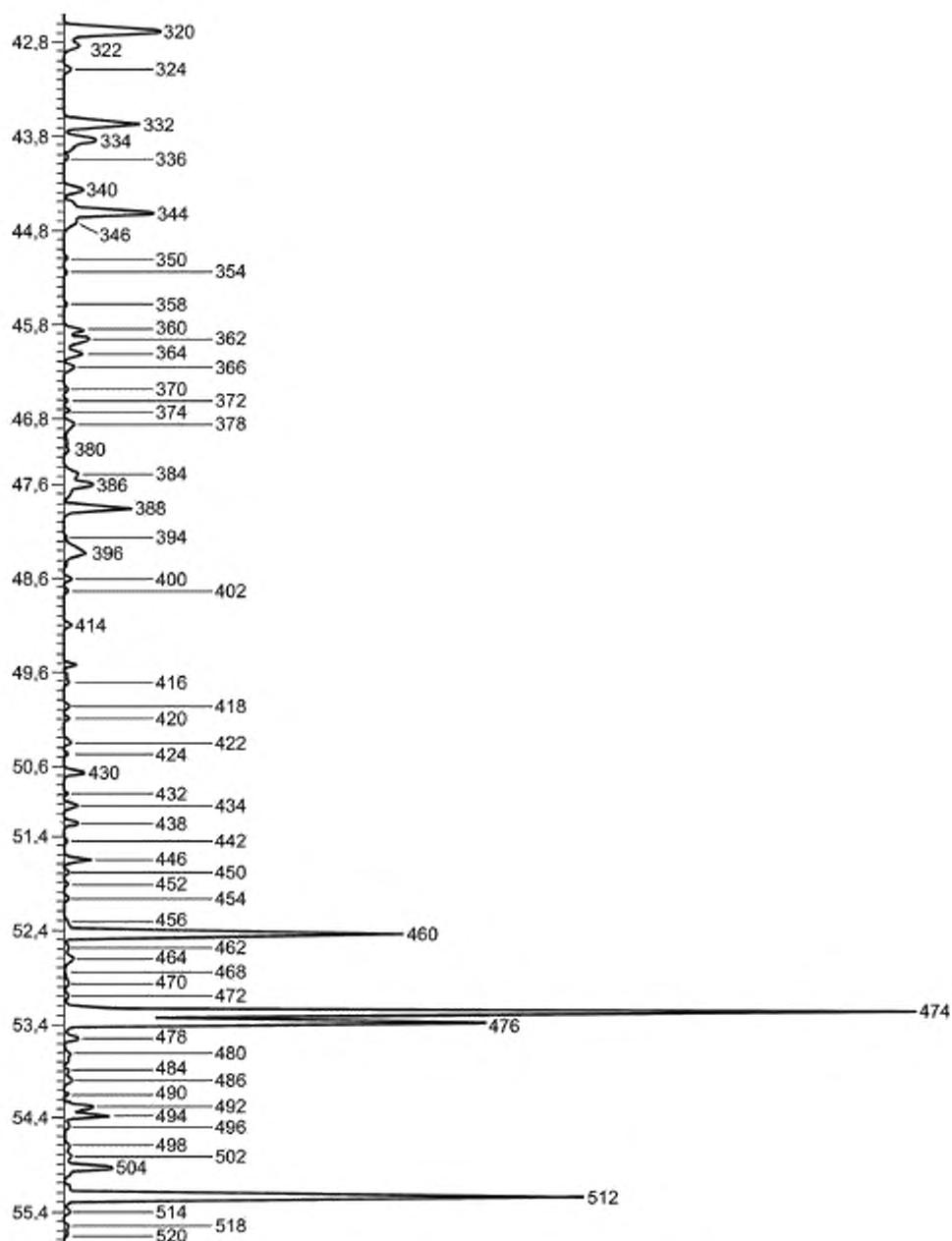


Рисунок X2.9 — Детальная хроматограмма стандартного образца бензина CGSB0496 (42,5 — 55,5 мин)

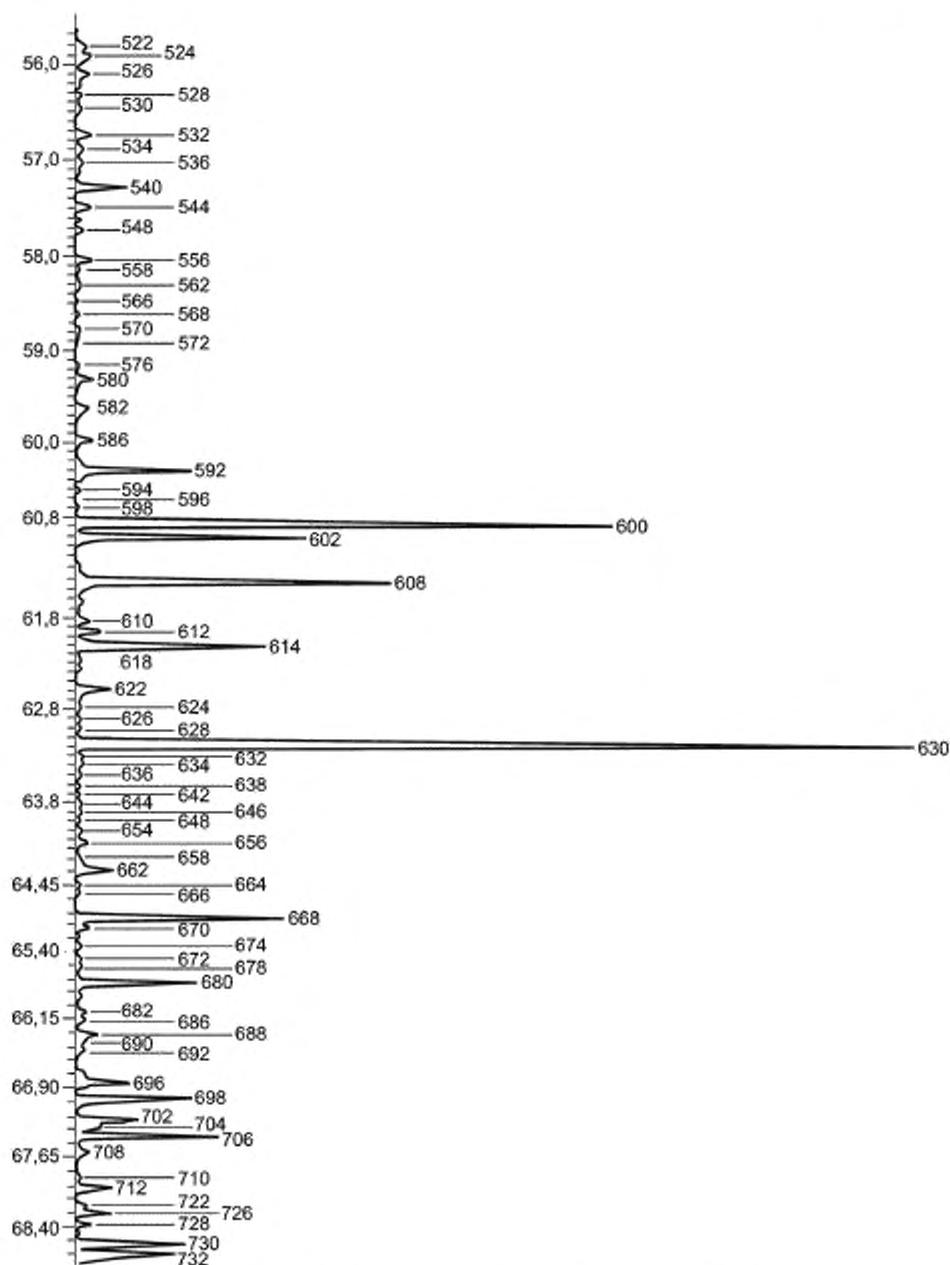


Рисунок X2.10 — Детальная хроматограмма стандартного образца бензина CGSB0496 (55.5 — 68.5 мин)

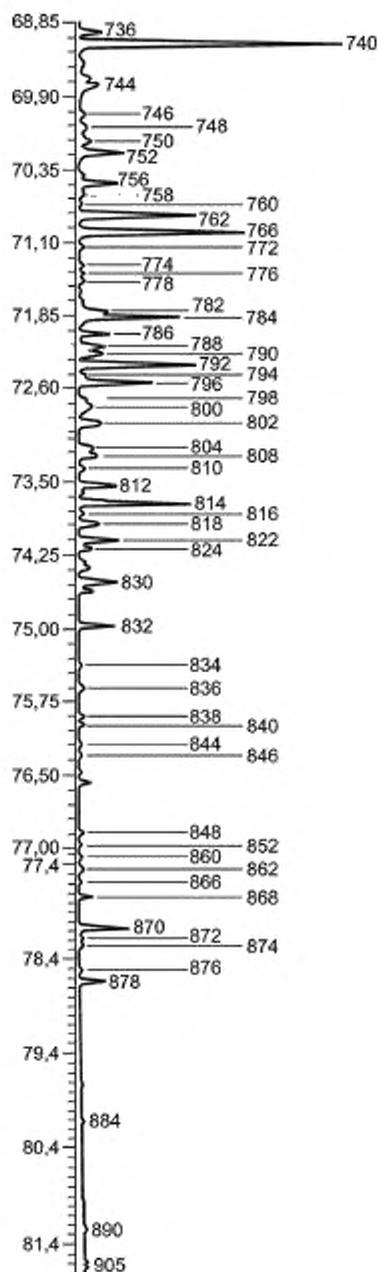


Рисунок X2.11 — Детальная хроматограмма стандартного образца бензина CGSB0496 (68,5 — 82 мин)

X2.7 В таблице X2.4 приведены совместно элюирующиеся соединения.

Т а б л и ц а X2.4 — Совместно элюирующиеся соединения^{A), B)}

Время удержания (RT), мин	Преобладающий компонент	Совместно элюирующийся компонент
23,00	Метилциклопентан	2,2-Диметилпентан
27,13	3,3-Диметилпентан	5-Метил-1-гексен
29,36	2-Метилгексан	2,3-Диметилпентан и C ₇ -олефин
38,76	2,5-Диметилгексан	C ₈ -олефин
41,32	Толуол	2,3,3-Триметилпентан ^{C)}
44,59	3-Метилгептан	трет-1,4-Диметил-циклогексан
54,27	4-Метилоктан	C ₉ -олефин
55,27	орто-Ксилол	1,1,2-Триметилциклогексан
72,54	1,2,3,4-Тетраметилбензол	C ₁₁ -ароматические соединения

^{A)} Из-за возможности совместного элюирования на других участках хроматограмм необходимо обращать внимание на интерпретацию данных.
^{B)} В некоторых областях хроматограмм может потребоваться ручное интегрирование пиков.
^{C)} 2,3,3-Триметилпентан частично разрешается в виде плеча на пике толуола.

X2.8 Таблица X2.5 содержит значения времени удерживания и свойства соединений, идентифицированных для стандартного бензина CGSB0496.

X2.9 Требуется выполнять все положения настоящего метода, за исключением следующих:

X2.9.1 В 7.2 вместо гелия используют газ-носитель водород.

X2.9.2 В 8.1 настоящего стандарта линейная скорость газа задается при постоянном давлении 31,0 psi, что соответствует средней линейной скорости 42 см/с при 35 °C. Данная линейная скорость оптимальна для водорода. В этих изотермических условиях метан должен элюироваться за 3,9 мин. При условиях, заданных в таблице X2.1, время элюирования метана составляет 3,6 мин.

X2.9.3 Условия хроматографирования, приведенные в таблице 1 настоящего стандарта, модифицированы и представлены в таблице X2.1.

Т а б л и ц а X2.5 — Значения времени удерживания и свойства компонентов

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания, мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
1	Метан	3,89	16,04	1,000
2	Этен	3,93	28,03	0,874
3	Этан	3,97	30,05	0,937
4	Пропен	4,01	42,05	0,874
5	Пропан	4,05	44,06	0,916
6	Изобутан	4,70	58,08	0,906
7	Метанол	4,92	32,03	2,672
8	Изобутен	5,13	56,06	0,874
9	Бутен-1	5,15	56,06	0,874
10	1,3-Бутадиен	5,24	54,09	0,843
12	n-Бутан	5,33	58,08	0,906
14	транс-Бутен-2	5,59	56,06	0,874
16	2,2-Диметилпропан	5,65	72,09	0,899
18	цис-Бутен-2	5,97	56,06	0,874
20	1,2-Бутадиен	6,39	54,09	0,843
22	Этанол	6,83	46,04	1,862
24	3-Метилбутен-1	7,12	70,08	0,874
26	Изопентан	7,96	72,09	0,899
28	1,4-Пентадиен	8,25	68,06	0,849
30	Бутин-2	8,55	54,05	0,843
32	Пентен-1	8,84	70,08	0,874

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
34	Изопропанол	9,07	60,06	1,950
36	2-Метилбутен-1	9,31	70,08	0,874
38	<i>n</i> -Пентан	9,60	72,09	0,899
40	2-Метилбутадиен-1,3	9,89	68,06	0,849
42	<i>транс</i> -Пентен-2	10,23	70,08	0,874
44	3,3-Диметилбутен-1	10,60	84,09	0,874
46	<i>цис</i> -Пентен-2	10,81	70,08	0,874
48	<i>трет</i> -Бутанол (ТБА)	10,92	74,12	1,161
50	2-Метилбутен-2	11,19	70,08	0,874
52	<i>транс</i> -1,3-Пентадиен	11,39	68,06	0,849
54	3-Метилбутадиен-1,2	11,39	68,06	0,849
56	Циклопентадиен	11,63	67,10	0,824
58	<i>цис</i> -1,3-Пентадиен	11,87	68,06	0,849
60	1,2-Пентадиен	12,11	68,06	0,849
62	2,2-Диметилбутан	12,42	86,11	0,895
64	Циклопентен	13,96	68,06	0,849
66	4-Метилпентен-1	14,68	84,09	0,874
68	3-Метилпентен-1	14,70	84,09	0,874
70	<i>n</i> -Пропанол	14,89	60,06	1,770
72	Циклопентан	15,05	70,08	0,874
74	2,3-Диметилбутан	15,49	86,11	0,895
76	2,3-Диметилбутен-1	15,62	84,09	0,874
78	МТБЭ	15,70	88,09	1,407
80	<i>цис</i> -4-Метилпентен-2	16,03	84,09	0,874
82	2-Метилпентан	16,15	86,11	0,895
84	<i>транс</i> -4-Метилпентен-2	16,42	84,09	0,874
86	Метилэтилкетон (МЭК)	17,08	72,06	1,570
88	3-Метилпентан	17,73	86,11	0,895
90	C ₆ -олефин	18,10	84,09	0,874
92	2-Метилпентен-1	18,46	84,09	0,874
94	Гексен-1	18,60	84,09	0,874
96	Метил- <i>втор</i> -бутиловый эфир (МВБЭ)	18,95	88,09	1,550
98	C ₆ -олефин	19,29	84,09	0,874
100	Бутанол-2	19,63	74,07	1,600
102	2-Этилбутен-1	19,97	84,09	0,874
104	<i>n</i> -Гексан	20,03	86,11	0,895
106	<i>цис</i> -Гексен-3	20,45	84,09	0,874
108	Диизопропилэфир (ДИПЭ)	20,60	102,00	1,600
110	<i>транс</i> -Гексен-3+гексадиен	20,74	84,09	0,874
112	2-Метилпентен-2	21,04	84,09	0,874
114	3-Метилциклопентен	21,19	82,10	0,853
116	<i>транс</i> -3-Метилпентен-2	21,28	84,09	0,874
118	<i>цис</i> -Гексен-2	21,86	84,09	0,874
120	3,3-Диметилпентен-1	22,29	98,19	0,874
122	<i>цис</i> -3-Метилпентен-2	22,70	84,09	0,874
124	ЭТБЭ	22,87	102,18	1,255
126	2,3-Диметилбутадиен-1,3	22,94	82,00	0,853
128	Метилциклопентан	23,00	84,09	0,874
130	2,2-Диметилпентан	23,05	100,13	0,892
132	4,4-Диметилпентен-1	23,19	98,19	0,874
134	Изобутанол	23,37	74,12	1,500

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
136	2,3-Диметилбутен-2	23,55	84,09	0,874
138	2,4-Диметилпентан	24,03	100,13	0,892
140	1,3,5-Гексатриен	24,22	80,00	0,832
142	2,2,3-Триметилбутан	24,33	100,13	0,892
144	Метилциклопентадиен	24,77	80,00	0,832
146	C ₇ -олефин	24,83	98,19	0,874
148	C ₇ -олефин	25,13	98,19	0,874
150	C ₇ -диолефин	25,43	96,00	0,856
152	4-Метилциклопентен	25,71	82,10	0,853
154	Метиленциклопентан	26,01	82,10	0,853
156	Бензол	26,13	78,05	0,812
158	1-Метил-1-циклопентен	26,27	82,10	0,853
160	C ₇ -олефин	26,64	98,19	0,874
162	<i>цис</i> -2-Метилгексен-3	26,82	98,19	0,874
164	3,3-Диметилпентан+5-метилгексен-1	27,19	100,13	0,892
166	Циклогексан	27,32	84,09	0,874
168	<i>транс</i> -2-Метил-3-гексан	27,78	98,19	0,874
170	3,3-Диметил-1,4-пентадиен	28,18	96,00	0,856
172	<i>n</i> -Бутанол	28,29	74,07	1,500
174	Диметилциклопентадиен	28,33	94,16	0,838
176	<i>трет</i> -2-Этил-3-метил-1-бутен	28,52	98,19	0,874
178	4-Метилгексен-1	28,71	98,19	0,874
180	C ₇ -олефин	28,86	98,19	0,874
182	3-Метилгексен-1	29,00	98,19	0,874
184	4-Метилгексен-2	29,14	98,19	0,874
186	2-Метилгексан+C ₇ -олефин	29,37	100,13	0,892
188	2,3-Диметилпентан	29,52	100,13	0,892
190	Циклогексен	29,62	82,10	0,853
192	<i>трет</i> -Амил-метиловый эфир (ТАМЭ)	29,89	102,18	1,210
194	C ₇ -олефин	30,11	98,19	0,874
196	C ₇ -олефин	30,33	98,19	0,874
198	3-Метилгексан	30,55	100,13	0,892
200	C ₇ -олефин	30,71	98,19	0,874
202	C ₇ -олефин	30,88	98,19	0,874
204	<i>транс</i> -1,3-Диметилциклопентан	31,04	98,11	0,874
206	<i>цис</i> -1,3-Диметилциклопентан	31,42	98,11	0,874
208	<i>транс</i> -1,2-Диметилциклопентан	31,82	98,11	0,874
210	3-Этилпентан	31,95	100,10	0,892
212	C ₇ -олефин	32,12	98,19	0,874
214	2,2,4-Триметилпентан	32,22	114,14	0,890
216	C ₇ -олефин	32,47	98,19	0,874
218	1-Гептан	32,49	98,19	0,874
220	C ₇ -олефин	32,57	98,19	0,874
222	2,3-Диметил-1,3-пентадиен	32,87	96,18	0,874
224	C ₇ -диолефин	33,11	96,00	0,856
226	C ₇ -олефин	33,35	98,19	0,874
228	C ₇ -диолефин	33,64	96,00	0,856
230	C ₇ -диолефин	33,85	96,00	0,856
232	C ₇ -олефин	33,95	98,19	0,874
234	<i>n</i> -Гептан	34,15	100,13	0,892
236	<i>цис</i> -3-Гептан	34,29	98,19	0,874

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
238	2-Метил-2-гексен	34,49	98,19	0,874
240	<i>цис</i> -Метил-3-гексен	34,65	98,19	0,874
242	<i>транс</i> -Гептен-3	34,89	98,19	0,874
244	3-Этил-2-пентен-2	35,00	96,17	0,856
246	1,5-Диметилциклопентен	35,11	96,17	0,856
248	<i>транс</i> -2-Метил-3-гексен	35,46	98,19	0,874
250	C ₇ -диолефин+C ₇ -триолефин	35,72	96,00	0,856
252	2,3-Диметил-2-пентен	35,96	98,19	0,874
254	3-Этилпентен	36,12	98,19	0,874
256	Метилциклогексан	36,25	98,11	0,874
258	C ₇ -олефин	36,58	98,19	0,874
260	1,1,3-Триметилциклопентан	36,90	112,10	0,874
262	2,2-Диметилгексан	37,24	114,10	0,890
264	2,3,4-Триметил-1,4-пентадиен	37,60	110,00	0,859
266	3,3-Диметил-1,5-гексадиен	37,63	110,21	0,859
268	C ₈ -диолефин	37,69	98,19	0,874
270	C ₇ -олефин	37,93	98,19	0,874
272	Этилциклопентан	38,10	98,11	0,874
274	3-Метилциклогексан	38,34	96,17	0,856
276	Метилциклогексадиен	38,43	94,17	0,838
278	2,2,3-Триметилпентан	38,53	114,10	0,890
280	2,5-Диметилгексан+C ₈ -олефин	38,76	114,14	0,890
282	2,4-Диметилгексан	38,97	114,14	0,890
284	C ₇ -триолефин+C ₈ -олефин	39,19	96,18	0,856
286	<i>транс</i> , <i>цис</i> -1,2,4-Триметилциклопентан	39,46	112,10	0,874
288	3,3-Диметилгексан+C ₈ -олефин	39,75	114,14	0,890
292	C ₇ -триолефин+C ₈ -олефин	39,92	96,18	0,856
294	<i>транс</i> , <i>цис</i> -1,2,3-Триметилциклопентан	40,50	112,10	0,874
296	C ₈ -олефин	40,57	112,13	0,874
298	C ₈ -олефин	40,63	112,13	0,874
299	C ₈ -олефин	40,69	112,13	0,874
300	C ₈ -олефин	40,79	112,13	0,874
302	2,3,4-Триметилпентан	40,94	114,14	0,890
304	C ₇ -диолефин	41,11	96,00	0,856
306	Толуол	41,32	92,06	0,821
308	2,3,3-Триметилпентан	41,38	114,23	0,890
310	C ₈ -олефин	41,54	112,13	0,874
312	C ₈ -диолефин	41,99	110,00	0,859
314	C ₈ -олефин	42,08	112,13	0,874
316	C ₈ -олефин	42,26	112,13	0,874
318	C ₈ -олефин	42,35	112,13	0,874
320	C ₈ -диолефин+C ₈ -олефин	42,41	110,00	0,859
322	2,3-Диметилгексан	42,68	114,14	0,890
324	2-Метил-3-этилпентан	42,84	114,14	0,890
326	1,1,2-Триметилциклопентан+C ₇ -триолефин	43,09	112,10	0,874
328	C ₈ -диолефин+C ₈ -парафин	43,23	110,00	0,859
330	C ₈ -олефин	43,37	112,13	0,874
332	C ₈ -олефин	43,52	112,13	0,874
334	2-Метилгептан	43,66	114,14	0,890
336	4-Метилгептан	43,33	114,14	0,890
338	C ₈ -диолефин+C ₇ -олефин	44,01	112,10	0,856

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
338	C ₈ -олефин	44,11	112,13	0,874
340	<i>цис</i> -1,4-Диметилциклогексан	44,37	112,10	0,874
342	<i>транс</i> -1,4-Диметилциклогексан	44,51	112,10	0,874
344	3-Метилгептан	44,61	114,14	0,890
346	3-Этилгексан	44,71	114,14	0,890
348	C ₈ -диолефин	44,89	110,00	0,874
350	C ₈ -олефин	45,06	112,13	0,874
352	C ₈ -олефин	45,14	112,13	0,874
354	1,1-Диметилциклогексан	45,24	112,13	0,874
356	C ₈ -олефин	45,43	112,13	0,874
358	C ₈ -олефин	45,58	112,13	0,874
360	<i>цис</i> -1-Этил-3-метилциклопентан	45,87	112,10	0,874
362	2,2,5-Триметилгексан	45,96	128,20	0,888
364	<i>транс</i> -1-Этил-3-метилциклопентан	46,11	112,10	0,874
366	<i>транс</i> -1-Этил-2-метилциклопентан	46,26	112,10	0,874
368	1-Метил-1-этилциклопентан	46,34	112,22	0,874
370	1-Октен	46,48	112,13	0,874
372	C ₈ -олефин	46,61	112,13	0,874
374	<i>транс</i> -1,2-Диметилциклогексан	46,71	112,10	0,874
376	C ₈ -олефин	46,79	112,13	0,874
378	C ₈ -олефин	46,96	112,22	0,874
380	<i>транс</i> -3-C ₈ -олефин	47,12	112,22	0,874
382	C ₈ -олефин	47,23	112,11	0,874
384	<i>транс</i> -1,3-Диметилциклогексан	47,49	112,13	0,874
386	<i>цис</i> -1,4-Диметилциклогексан	47,59	112,10	0,874
388	<i>н</i> -Октан	47,84	114,14	0,890
390	C ₈ -олефин	47,92	112,13	0,874
392	C ₈ -олефин	48,03	112,13	0,874
394	<i>транс</i> -2-Октен	48,19	112,13	0,874
396	Изопропилциклопентан	48,32	112,10	0,874
398	C ₉ -олефин	48,35	126,14	0,874
400	C ₉ -олефин	48,59	126,14	0,874
402	C ₉ -олефин	48,71	126,14	0,874
404	C ₉ -олефин	48,76	126,14	0,874
406	2,2,4-Триметилгексан	48,88	128,16	0,888
408	2,4,4-Триметилгексан	48,89	128,16	0,888
410	C ₉ -олефин	48,92	126,14	0,874
412	2,3,5-Триметилгексан	49,03	128,16	0,888
414	<i>цис</i> -2-Октен	49,10	112,13	0,874
416	2,2,3,4-Тетраметилпентан	49,70	128,16	0,888
418	2,2-Диметилгептан	49,96	128,16	0,888
420	<i>цис</i> -1,2-Диметилциклогексан	50,08	112,10	0,874
422	2,4-Диметилгептан	50,36	128,16	0,888
424	C ₉ -олефин	50,46	126,14	0,874
426	C ₉ -олефин	50,54	126,14	0,874
428	Этилциклогексан	50,59	112,10	0,874
430	Пропилциклопентан	50,67	112,10	0,874
432	2-Метил-4-этилгексан	50,90	128,20	0,888
434	2,6-Диметилгептан	51,02	128,20	0,888
436	C ₉ -олефин	51,14	126,14	0,874
438	1,1,4-Триметилциклогексан	51,21	126,14	0,874

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
440	C ₉ -олефин	51,29	126,14	0,874
442	C ₉ -олефин	51,44	126,14	0,874
444	1,1,3-Триметилциклогексан	51,45	126,24	0,874
446	2,5 и 3,5-Диметилгептан	51,64	128,16	0,888
448	C ₉ -олефин	51,69	126,14	0,874
450	3,3-Диметилгептан	51,76	128,20	0,888
452	C ₉ -изопарафин	51,90	128,26	0,888
454	C ₉ -олефин	52,05	126,14	0,874
456	2,3,3-Триметилгексан	52,30	128,16	0,888
458	C ₉ -олефин	52,38	126,14	0,874
460	Этилбензол	52,44	106,08	0,827
462	C ₉ -олефин	52,58	126,14	0,874
464	<i>транс</i> -1,2,4-Триметилциклогексан	52,69	126,14	0,874
466	C ₉ -олефин	52,76	126,14	0,874
468	2,3,4-Триметилгексан	52,88	128,20	0,888
470	C ₉ -олефин	52,94	126,24	0,874
472	3,3,4-Триметилгексан	53,07	128,16	0,888
474	Метаксилол	53,28	106,08	0,827
476	Параксилол	53,37	106,03	0,827
478	2,3-Диметилгептан	53,54	128,16	0,888
480	3,5-Диметилгептан	53,71	128,20	0,888
482	3,4-Диметилгептан	53,76	128,16	0,888
484	C ₉ -олефин	53,89	126,14	0,874
486	3-Метил-3-этилгексан	53,99	128,16	0,888
488	C ₉ -олефин	54,09	126,14	0,874
490	4-Этилгептан	54,14	128,16	0,888
492	4-Метилотан+C ₉ -олефин	54,27	128,20	0,888
494	2-Метилотан	54,36	128,20	0,888
496	C ₉ -олефин	54,47	126,14	0,874
498	C ₉ -изопарафин	54,67	128,20	0,888
500	C ₉ -олефин	54,74	126,14	0,874
502	3-Этилгептан	54,81	128,20	0,888
504	3-Метилотан	54,93	128,20	0,888
506	C ₉ -изопарафин	55,02	126,14	0,874
508	<i>цис</i> -1,2,4-Триметилциклогексан	55,08	126,14	0,874
510	1,1,2-Триметилциклогексан	55,10	126,14	0,874
512	<i>орто</i> -Ксилол	55,24	106,08	0,827
514	C ₉ -олефин	55,38	126,14	0,874
516	C ₉ -изопарафин	55,47	128,26	0,888
518	C ₉ -изопарафин	55,56	128,26	0,888
520	C ₉ -олефин	55,63	128,20	0,874
522	<i>транс</i> -1-Этил-4-метилциклогексан	55,81	126,14	0,874
524	<i>цис</i> -1-Этил-4-метилциклогексан	55,90	126,14	0,874
526	C ₉ -изопарафин	56,09	128,20	0,888
528	1-Нонен	56,32	126,14	0,874
530	Изобутилциклопентан	56,45	126,14	0,874
532	C ₉ -изопарафин	56,74	128,20	0,888
534	<i>транс</i> -3-Нонен	56,89	126,14	0,874
536	<i>цис</i> -3-Нонен	57,03	126,14	0,874
538	C ₉ -изопарафин	57,16	128,20	0,888
540	<i>n</i> -Нонан	57,26	128,16	0,888

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
542	C ₁₀ -олефин	57,40	140,16	0,874
544	<i>транс</i> -2-Нонен	57,48	126,14	0,874
546	1-Метил-1-этилциклогексан	57,63	126,14	0,874
548	1-Метил-2-пропилциклопентан	57,70	126,14	0,874
550	C ₁₀ -олефин	57,79	140,16	0,874
552	C ₁₀ -изопарафин	57,87	142,17	0,887
554	C ₁₀ -изопарафин	57,96	142,17	0,887
556	Изопропилбензол	58,03	118,08	0,832
558	<i>цис</i> -Нонен-2	58,12	126,14	0,874
560	<i>трет</i> -Бутилциклопентан	58,15	126,14	0,874
562	C ₉ -олефин	58,30	126,14	0,874
564	Нонен	58,42	126,24	0,874
566	Изопропилциклогексан	58,47	126,14	0,874
568	3,3,5-Триметилгептан	58,61	142,17	0,887
570	2,2-Диметилотан	58,78	142,17	0,887
572	2,4-Диметилотан	58,90	142,17	0,887
574	1-Метил-4-изопропилциклогексан	59,00	140,16	0,874
576	<i>втор</i> -Бутилциклопентан	59,16	126,14	0,874
578	Пропилциклогексан	59,19	126,14	0,874
580	2,5-Диметилотан	59,31	142,17	0,887
582	Бутилциклопентан	59,62	126,14	0,874
584	2,6-Диметилотан	59,63	142,17	0,887
586	3,6-Диметилотан	59,97	142,17	0,887
588	1-Метил-2-этилциклогексан	60,05	126,14	0,874
590	C ₁₀ -олефин	60,21	140,16	0,874
592	Пропилбензол	60,30	120,09	0,832
594	3,3-Диметилотан	60,51	142,17	0,887
596	3-Метил-5-этилгептан	60,61	142,17	0,887
598	C ₁₀ -олефин	60,69	140,16	0,874
600	1-Этил-3-метилбензол	60,87	120,09	0,832
602	1-Этил-4-метилбензол	61,01	120,09	0,832
604	Нафтен	61,26	140,27	0,874
606	1,3,5-Триметилбензол	61,30	120,09	0,832
608	2,3-Диметилотан	61,43	142,17	0,887
610	5-Метилнонан	61,83	142,17	0,887
612	4-Метилнонан	61,95	142,17	0,887
614	2-Метилнонан	62,11	142,17	0,887
616	1-Этил-2-метилбензол	62,21	120,09	0,832
618	3-Этилотан	65,37	142,17	0,887
620	Нафтен	62,45	140,16	0,874
622	3-Метилнонан	62,58	142,17	0,887
624	C ₁₀ -олефин	62,77	140,16	0,874
626	C ₁₀ -изопарафин	62,92	142,17	0,887
628	C ₁₀ -изопарафин	62,99	142,17	0,887
630	1,2,4-Триметилбензол	63,18	120,09	0,832
632	C ₁₀ -изопарафин	63,30	142,17	0,887
634	C ₁₀ -изопарафин	63,37	142,17	0,887
636	Изобутилциклогексан	63,51	140,27	0,874
638	C ₁₀ -изопарафин	63,62	142,28	0,887
640	C ₁₀ -изопарафин	63,67	142,37	0,887
642	1-Децен	63,72	140,27	0,874

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
644	C ₁₀ -изопарафин	63,81	142,28	0,887
646	C ₁₀ -изопарафин	63,92	142,17	0,887
648	C ₁₀ -ароматические углеводороды	63,99	134,11	0,837
654	Изобутилбензол	64,11	134,11	0,837
656	<i>транс</i> -1-Метил-2-пропилциклогексан	64,24	140,16	0,874
652	Нафтен	64,26	140,16	0,874
650	C ₁₀ -изопарафин	64,29	142,17	0,887
658	C ₁₀ -изопарафин	64,36	142,17	0,887
660	<i>втор</i> -Бутилбензол	64,38	134,11	0,837
662	<i>n</i> -Декан	64,49	142,17	0,887
664	C ₁₁ -изопарафин	64,65	156,19	0,886
666	C ₁₁ -изопарафин	64,74	156,19	0,886
668	1,2,3-Триметилбензол	65,01	120,09	0,832
670	1-Метил-3-изопропилбензол	65,10	134,11	0,837
674	1-Метил-4-изопропилбензол	65,32	134,11	0,837
676	C ₁₁ -изопарафин	65,47	156,19	0,886
672	C ₁₁ -изопарафин	65,50	156,19	0,886
678	C ₁₁ -изопарафин	65,57	156,19	0,886
680	2,3-Дигидроинден	65,75	118,08	0,819
682	<i>втор</i> -Бутилциклогексан	66,07	140,16	0,874
684	C ₁₁ -изопарафин	66,12	156,19	0,886
686	1-Метил-2-изопропилбензол	66,15	134,11	0,837
688	3-Этилнонан	66,31	156,19	0,886
690	C ₁₁ -изопарафин	66,38	156,19	0,886
692	Нафтен	66,48	140,16	0,874
694	C ₁₁ -изопарафин	66,63	126,19	0,886
696	1,3-Диэтилбензол	66,84	134,11	0,837
698	1-Метил-3-пропилбензол	67,01	134,11	0,837
700	1,4-Диэтилбензол	67,10	134,11	0,837
702	1-Метил-4-пропилбензол	67,25	134,11	0,837
704	Бутилбензол	67,32	134,11	0,837
706	3,5-Диметил-1-этилбензол	67,42	134,11	0,837
708	1,2-Диэтилбензол	67,59	134,11	0,837
710	C ₁₁ -изопарафин	67,86	156,19	0,886
712	C ₁₀ -ароматические углеводороды	67,98	134,11	0,837
714	C ₁₀ -ароматические углеводороды	68,01	134,11	0,837
716	C ₁₀ -ароматические углеводороды	68,09	134,11	0,837
718	1-Метил-2-пропилбензол	68,14	134,11	0,837
720	C ₁₀ -ароматические углеводороды	68,14	134,22	0,837
722	5-Метилдекан	68,17	156,19	0,886
724	4-Метилдекан	68,20	156,19	0,886
726	2-Метилдекан	68,25	156,32	0,886
728	C ₁₁ -изопарафин	68,36	156,19	0,886
730	1,4-Диметил-2-этилбензол	68,59	134,11	0,837
732	1,3-Диметил-4-этилбензол	68,71	134,11	0,837
734	C ₁₁ -изопарафин	68,77	156,19	0,886
736	3-Триметилдекан	68,95	156,19	0,886
738	C ₄ -индан	68,99	132,21	0,837
740	1,2-Диметил-4-этилбензол	69,05	134,11	0,837
742	C ₁₁ -изопарафин	69,12	156,19	0,886
744	1,3-Диметил-2-этилбензол	69,48	134,11	0,837

Продолжение таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
746	C ₁₁ -изопарафин	69,78	156,19	0,886
748	C ₁₁ -изопарафин	69,92	156,19	0,886
750	1-Метил-4-трет-бутилбензол	70,06	148,13	0,840
752	1,2-Диметил-3-этилбензол	70,18	134,11	0,837
754	1-Этил-2-изопропилбензол	70,35	148,13	0,840
756	n-Ундекан	70,49	156,19	0,886
758	1-Этил-4-изопропилбензол	70,57	148,13	0,840
760	C ₁₂ -изопарафин	70,70	170,20	0,885
762	1,2,4,5-Тетраметилбензол	70,82	134,11	0,837
764	2-Метилбутилбензол	70,90	148,13	0,840
766	1,2,3,5-Тетраметилбензол	71,00	134,11	0,837
768	3-Метилбутилбензол	71,03	148,25	0,840
770	C ₁₁ -ароматические углеводороды	71,04	148,13	0,840
772	C ₁₂ -изопарафин	71,14	170,20	0,885
774	C ₁₁ -ароматические углеводороды	71,33	148,13	0,840
776	C ₁₁ -ароматические углеводороды	71,41	148,13	0,840
778	C ₁₁ -ароматические углеводороды	71,47	148,13	0,840
780	1-трет-Бутил-2-метилбензол	71,69	148,13	0,840
782	C ₁₁ -ароматические углеводороды	71,80	148,13	0,840
784	1-Этил-2-пропилбензол	71,86	148,13	0,840
786	C ₁₁ -ароматические углеводороды	72,03	148,13	0,840
788	C ₁₁ -ароматические углеводороды	72,17	148,13	0,840
790	C ₁₁ -ароматические углеводороды	72,24	148,13	0,840
792	1-Метил-3-бутилбензол	72,35	148,13	0,840
794	C ₁₁ -ароматические углеводороды	72,47	148,25	0,840
796	1,2,3,4-Тетраметилбензол+C ₁₁ -ароматические углеводороды	72,54	148,25	0,840
798	Пентилбензол	72,73	148,13	0,840
800	транс-1-Метил-2-(4-метилпентил)-циклопентан	72,80	168,33	0,874
802	C ₁₁ -ароматические углеводороды	72,95	148,13	0,840
804	C ₁₁ -ароматические углеводороды	73,16	148,13	0,840
806	C ₁₁ -ароматические углеводороды	73,19	148,13	0,840
808	C ₁₂ -изопарафин	73,23	170,20	0,885
810	1,2,3,4-Тetraгидронафталин	73,35	132,09	0,824
812	1-трет-Бутил-3,5-диметилбензол	73,53	162,30	0,843
814	Нафталин	73,72	128,06	0,799
816	1,1-Диметилиндан	73,82	146,10	0,829
818	1,2-Диметилиндан	73,92	146,10	0,829
820	1,6-Диметилиндан	74,00	146,10	0,829
822	C ₁₁ -ароматические углеводороды	74,10	148,25	0,840
824	1-Этилиндан	74,18	146,10	0,829
826	2-Этилиндан	74,33	146,10	0,829
828	Этил-1,3,5-триметилбензол	74,44	148,25	0,840
830	1,3-Дипропилбензол	74,61	162,34	0,843
832	n-Додекан	74,98	170,20	0,885
834	Этил-1,2,4-триметилбензол	75,38	148,25	0,840
836	C ₁₁ -ароматические углеводороды	75,61	148,10	0,840
838	C ₁₁ -ароматические углеводороды	75,90	148,13	0,840
840	C ₁₂ -ароматические+C ₂ -индан	75,98	162,30	0,843
842	2,4-Диметилиндан	76,07	146,10	0,829
844	4-Этилиндан	76,20	146,10	0,829

Окончание таблицы X2.5

Номер пика	Наименование компонента	Время удерживания мин	Молярная масса	Относительный коэффициент отклика (RRF)
846	1- <i>трет</i> -Бутил-4-этилбензол	76,30	162,30	0,843
848	1,3-Диметилиндан	77,10	146,10	0,829
850	1-Метил-4-пентилбензол	77,20	162,30	0,843
852	4,7-Диметилиндан	77,23	146,10	0,829
854	5,6-Диметилиндан	77,26	146,10	0,829
856	C ₁₃ -ароматические углеводороды	77,30	162,30	0,843
858	Гексилбензол	77,33	162,30	0,843
860	C ₆ -бензол	77,36	162,30	0,843
862	C ₆ -бензол	77,45	162,30	0,843
864	C ₆ -бензол	77,50	162,30	0,843
866	4,5-Диметилиндан	77,60	146,10	0,829
868	C ₆ -бензол	77,75	162,30	0,843
870	2-Метилнафталин	78,09	142,08	0,806
872	C ₆ -бензол	78,19	162,30	0,843
874	C ₆ -бензол	78,28	162,30	0,843
876	<i>n</i> -Тридекан	78,54	184,22	0,884
878	1-Метилнафталин	78,64	142,08	0,806
880	C ₆ -бензол	79,15	162,30	0,843
882	C ₂ -тетралин	79,66	160,20	0,843
884	C ₆ -бензол	80,11	162,30	0,843
886	C ₆ -бензол	80,49	162,30	0,843
888	C ₁₃ -изопарафин	80,87	184,22	0,883
890	<i>транс</i> -7-Декан	81,24	140,20	0,874
895	2,6-Диметилнафталин	81,38	156,30	0,812
900	2,7-Диметилнафталин	81,50	156,30	0,812
905	<i>n</i> -Тетрадекан	81,59	198,34	0,883
910	1,3-Диметилнафталин	82,43	156,30	0,812
940	1,2-Диметилнафталин	82,55	156,30	0,812
950	<i>n</i> -Пентадекан	82,57	212,34	0,883
915	1,6-Диметилнафталин	82,59	156,30	0,812
925	1,4-Диметилнафталин	82,86	156,30	0,812
920	1,5-Диметилнафталин	83,01	156,30	0,812
930	Аценафталин	83,26	156,30	0,801

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных стандартов АСТМ ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ASTM D 1319	IDT	ГОСТ Р 52063 — 2003 «Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции»
ASTM D 1744	—	*
ASTM D 4815	—	*
ASTM D 5599	—	*
ASTM D 5623	—	*
ASTM E 355	—	*
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта. Перевод данного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: IDT — идентичные стандарты.</p>		

УДК 621.892:543:006.354

ОКС 75.160.20

Б19

ОКСТУ 0209

Ключевые слова: газовая хроматография, бензин, индивидуальный углеводородный анализ, топлива с добавкой оксигенатов, топлива для двигателей внутреннего сгорания

Редактор *Л. И. Нахимова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. И. Гаерищук*
Компьютерная верстка *А. П. Финогеновой*

Сдано в набор 17.04.2012. Подписано в печать 03.08.2012. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,84. Уч.-изд. л. 8,35. Тираж 116 экз. Зак. 694.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 258.

